



PL

Instrukcja używania i konserwacji

LG EVA CHAIR
LG EVA CHAIR 37

KRZESŁO EWAKUACYJNE



Antano Group S.r.l • Via delle Industrie, 10, 06034 Foligno (PG) ITALY
Tel +39 0742 381269 • Fax +39 0742 386574 • e-mail info@antanogroup.com

WWW.ANTANOGROUP.COM

Spis treści

1	WSTĘP.....	3
1.1	Producent	3
2	OZNAKOWANIE	3
2.1	Charakterystyka techniczna.....	3
2.2	Standardy zgodności i jakości	4
2.3	Warunki przechowywania, transportu i utylizacji	4
3	UŻYTKOWANIE.....	4
3.1	Informacje ogólne i komponenty	5
3.2	Składane uchwyty.....	5
3.3	Teleskopowe uchwyty przednie	6
3.4	Składanie krzeselka.....	6
4	GWARANCJA.....	7

UWAGA

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Antano Group S.r.l. nieustannie pracuje nad udoskonalaniem wszystkich typów i modeli sprzedawanych produktów, dlatego liczymy na Państwa zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w dostawie w zakresie formy, wyposażenia, ustawienia i techniki w stosunku do tego, co zostało ustalone w niniejszym dokumencie.

1 WSTĘP


Krzesła ewakuacyjne LG EVA-CHAIR i LG EVA-CHAIR 37 są przeznaczone do użycia tam, gdzie zachodzi potrzeba transportu osób chorych lub rannych, zwłaszcza na wąskich przestrzeniach.

1.1 Producent

Antano Group s.r.l. via delle Industrie, 10 06034 Foligno (PG), Włochy - P. IVA 02934570546; tel. 0039 0742 381269, fax 0039 0742 386574, web www.antanogroup.com, e-mail info@antanogroup.com.

W przypadku niebezpiecznego zdarzenia dot. wyrobu poinformuj o tym producenta lub dystrybutora.

2 OZNAKOWANIE

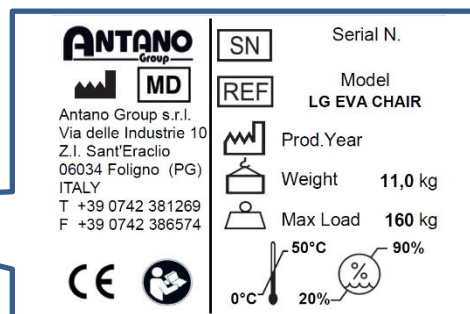

2.1 Charakterystyka techniczna

**WYPRODUKOWANO
W CHINACH**

Model	LG EVA-CHAIR	LG EVA-CHAIR 37
Długość (mm)	730	730
Szerokość (mm)	520	420
Szerokość siedziska (mm)	390	290
Wysokość (mm)	940	940
Wymiary po złożeniu (mm)	210x520x940	210x420x940
Masa netto (kg)	11.0	10.4
Masa całkowita (kg)	12.0	11.4
Maks. obciążenie (kg)	160	160

2.2 Standardy zgodności i jakości

Produkt jest oznaczony znakiem CE zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745 i późniejszymi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem (UE) 2020/561 (wyrób medyczny klasy 1).


Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z następującymi standardami:

Nr dokumentu	Tytuł dokumentu
ROZPORZĄDZENIE (EU) 2017/745	Europejskie rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych (EU)
ROZPORZĄDZENIE (EU) 2020/561	Zmiany do Rozporządzenia (EU) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych


Dla Antano Group działanie w oparciu o jakość jest najważniejsze, firma posiada certyfikaty ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016.

2.3 Warunki przechowywania, transportu i utylizacji

Temperatura otoczenia

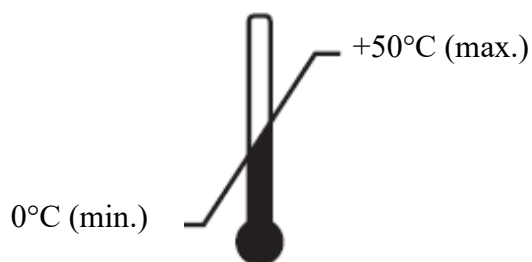

Wilgotność względna

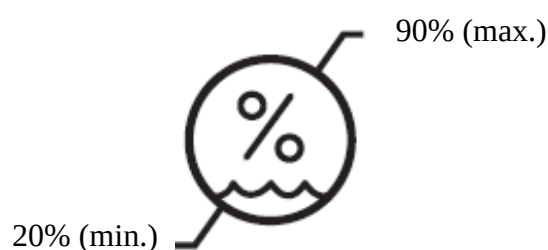

3 UŻYTKOWANIE

Krzesła ewakuacyjne LG EVA-CHAIR i LG EVA-CHAIR 37 wykonane są z wysokiej wytrzymałości stopu aluminium i wyposażone są w 2 tylne koła z hamulcami oraz w 2 przednie koła skrętne do łatwego przetaczania urządzenia na płaskim terenie.

Urządzenie posiada dwa składane uchwyty z tyłu i dwa teleskopowe uchwyty z przodu do przenoszenia urządzenia jak nosze po terenie nierównym lub pochyłym.

Urządzenie posiada również dwa składane podłokietniki.

3.1 Informacje ogólne i komponenty




- 1) Składane uchwyty tylne
- 2) Oparcie
- 3) Składane podłokietniki
- 4) Siedzisko
- 5) Teleskopowe uchwyty przednie
- 6) Przednie kółka skrętne
- 7) Tylne kółka z hamulcami


3.2 Składane uchwyty



3.3 Teleskopowe uchwyty przednie

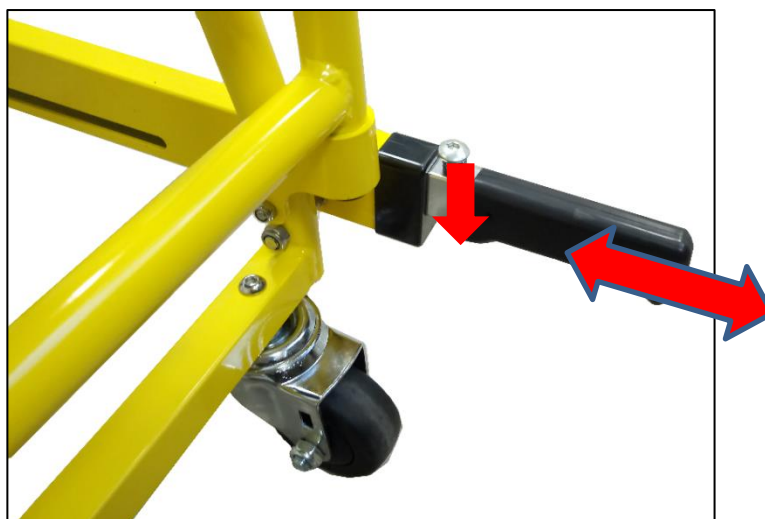

3.4 Składanie krzeselka

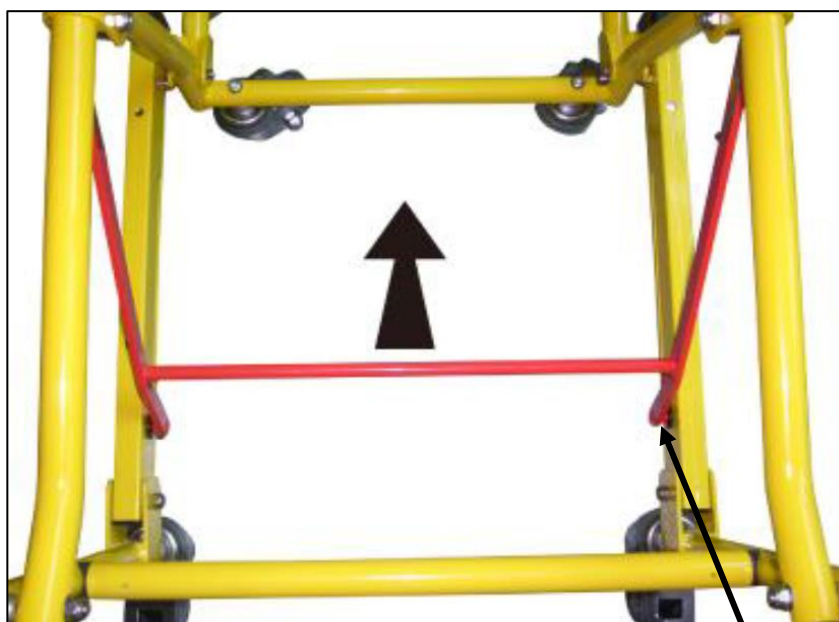

4 GWARANCJA

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją na wady produkcyjne, licząc od daty dostawy (włoski dekret ustawodawczy 24/2002 i dyrektywa 1999/44/WE).

W okresie gwarancji gwarantowana jest naprawa urządzenia na koszt producenta w przypadku stwierdzenia wady produkcyjnej.

Koszty transportu i opakowania wymagane do wysyłki produktu objętego gwarancją ponosi sprzedawca lub producent.

Gwarancja nie obejmuje części podlegających zużyciu ze względu na ich charakter i przeznaczenie (np. koła, tapicerka, itp.).

Gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzenia wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub innego niż określone w niniejszej instrukcji.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym montażem wykonanym przez klienta.
- Uszkodzeń spowodowanych wykonywaniem przez nieupoważnione osoby modyfikacji, napraw lub ingerencji w urządzenie.

Gwarancja nie daje prawa do odszkodowania za szkody.

Części zamienne są dostępne przez okres co najmniej 5 lat.

Jeśli klient wykryje jakiegokolwiek problemy z produktem, wypełniając specjalny formularz do zgłaszania wad/usterek, musi natychmiast powiadomić Antano Group S.r.l. lub autoryzowanego dealera, podając szczegółowe informacje na temat odkrytych wad i powołując się na dane wskazane na tabliczce znamionowej umieszczonej na produkcie. Po uzgodnieniach z Antano Group S.r.l. lub autoryzowanym dealerem, klient musi wysłać urządzenie do naprawy w ramach gwarancji.

W okresie gwarancyjnym, czynności techniczne zostaną przeprowadzone w siedzibie producenta, który sprawdzi również, czy problem techniczny wynika z wady produkcyjnej czy z innych przyczyn.

Niniejsza instrukcja musi być przechowywana przez właściciela i dołączona do urządzenia w celu zachowania uprawnień gwarancyjnych.

WYTWÓRCA:**Antano Group S.r.l**

Via delle Industrie 10, Zona Ind.le Sant'Eraclio
06034 Foligno (PG) - ITALY

Tel. 0742/381269 Fax. 0742/386574

www.antanogroup.com

info@antanogroup.com

Certyfikowany system nadzoru jakości

ISO 9001:2015

ISO 13485:2016

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:**Mobilex Sp. z o.o.**

ul. Duńska 3/5, 91-204 Łódź

Tel. +48 42 214 29 11; Fax. +48 42 214 14 05

e-mail: info@mobilex.pl

www.mobilex.pl

© Copyright Antano Group S.r.l.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza previo consenso scritto della Antano Group S.r.l.

All rights reserved. No part of this document can be photocopied, reproduced or translated into another language without the prior written consent of Antano Group S.r.l.