



ECOPOOL – WERSJA B

Instrukcja obsługi i konserwacji

Tłumaczenie z języka angielskiego



C09733 rev. 0.0 of 09/18/2024

PL



HISTORIA WERSJI		
Wersja	Data	Uwagi
0.0	15 czerwca 2025	Wydanie pierwsze

SPIS TREŚCI

1.	DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE.....	6
2.	POSTANOWIENIA OGÓLNE	7
2.1.	Wstęp	7
2.2.	Stosowane oznaczenia	7
2.3.	Obsługa klienta.....	7
3.	BEZPIECZEŃSTWO	8
3.1.	Informacje ogólne	8
3.2.	Piktogramy	8
3.3.	Urządzenia zabezpieczające	9
3.4.	Ograniczenia użytkowania	9
4.	WPROWADZENIE	10
4.1.	Producent.....	10
4.2.	Przewidywany okres użytkowania	10
4.3.	Przewidziane zastosowanie	10
4.4.	Identyfikacja podnośnika	10
4.5.	Transport i opakowanie	11
4.6.	Kontrola dostawy	11
5.	OPIS OGÓLNY.....	12
5.1.	Opis podnośnika.....	12
5.2.	Nazwy głównych części	12
5.3.	Urządzenia sterujące	13
5.3.1.	Pilot sterujący	13
5.4.	Specyfikacja wymiarowa	14
5.5.	Specyfikacja elektryczna	14
6.	PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA	15
6.1.	Przygotowanie miejsca rozpakowania	15
6.2.	Rozpakowywanie	15
6.3.	Ustawienie	16
6.4.	Ładowanie akumulatora	17
6.5.	Kontrola funkcjonalna	18
7.	OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE	19
7.1.	Ostrzeżenia dotyczące użytkowania	19
7.2.	Przemieszczanie podnośnika.....	19
7.3.	Przemieszczanie pacjenta	19
7.3.1.	Umieszczanie pacjenta na siedzisku	19
7.3.2.	Opuszczanie do basenu	20
7.3.3.	Podnoszenie z basenu	20
8.	KONSERWACJA	22
8.1.	Konserwacja i przeglądy okresowe	22

8.2. Diagnostyka i rozwiązywanie problemów	22
9. UTYLIZACJA I ZŁOMOWANIE	23
9.1. Utylizacja odpadów	23
10. GWARANCJA	24
10.1. Wstęp	24
10.2. Zakres gwarancji	24
10.3. Okres gwarancji	24
10.4. Procedura reklamacyjna	24
10.5. Zwrot materiałów	24
10.6. Wyłączenia z gwarancji	25
11. KARTA PRZEGLĄDÓW URZĄDZENIA	26

1. DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Producent:

Firma: DIGI PROJECT Snc

SRN: IT-MF-000044768

Adres: Strada provinciale Ovest, 15 - 46020 Pegognaga (MN) - Włochy

oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyrób

Kod	Model	ID BD/RDM	Basic UDI-DI	CND
ECO01	ECOPOOL	2563141/R	805530535ECO012W	V0805030102

Przewidziane zastosowanie:

Wyrób jest przeznaczony do umożliwienia przemieszczania i pozycjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową wewnątrz basenów zagłębionych w podłożu przez operatora.

Środowisko użytkowania: strefy wokół basenów zagłębionych w podłożu.

Przewidziani pacjenci: osoby o wzroście co najmniej 120 cm i masie ciała co najmniej 20 kg.

Osoby przewidziane do obsługi wyrobu: personel medyczny, lekarze i opiekunowie.

Podnośnika nie wolno użytkować w atmosferze potencjalnie wybuchowej lub palnej.

Klasa ryzyka: Klasa I (zgodnie z regułą 13 Załącznika VIII do Rozporządzenia (UE) 2017/745)

spełnia wymagania następujących aktów prawnych Unii:

(UE) 2017/745	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmieniające dyrektywę 2001/83/WE, rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 oraz uchylające dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG
2006/42/WE	Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE
2014/30/UE	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej
2011/65/UE	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zmieniona dyrektywą delegowaną (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r.

spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych / norm technicznych i/lub specyfikacji wspólnych:

IEC 60601-1:2007 + EC:2010 + A11:2012 + A1:2014 + A12:2015 + A2:2022 – Medyczne urządzenia elektryczne
Część 1: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych

CEI EN 60601-1-2:2018 + A1:2021 – Medyczne urządzenia elektryczne
Część 1: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych – Norma uzupełniająca: Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania i badania

UNI EN ISO 10535:2021 – Wyroby pomocnicze – Podnośniki do przemieszczania osób niepełnosprawnych – Wymagania i metody badań

Wyrób podlega procedurze oceny zgodności określonej w art. 52 ust. 7 Rozporządzenia (UE) 2017/745

Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej zgodnie z Dyrektywą 2006/42/WE: DIGI PROJECT Snc z siedzibą przy Strada Provinciale Ovest, 15 - 46020 Pegognaga (MN) – Włochy

Pegognaga,
15 czerwca 2025 r.

Daniele Mariani,
przedstawiciel prawny

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Wstęp

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące użytkowania i bieżącej konserwacji podnośnika ECOPOOL.

Uważnie zapoznaj się z ostrzeżeniami i instrukcjami, ponieważ zawierają one istotne informacje dotyczące BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI.

Opisy i ilustracje zawarte w tej publikacji nie mają charakteru wiążącego. DIGI PROJECT Snc zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, jakie uzna za stosowne w celu udoskonalenia wyrobu, bez konieczności aktualizacji niniejszej dokumentacji. Ilustracje i obrazy zamieszczone w tej instrukcji mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego stanu. Bezpieczeństwo operatora i pacjenta oraz prawidłowe działanie urządzenia zależą od przestrzegania i stosowania zaleceń opisanych w niniejszej instrukcji.

2.2. Stosowane oznaczenia

W niniejszej instrukcji występują następujące oznaczenia graficzne:

OSTRZEŻENIE

Umieszczane jest przed niektórymi procedurami. Jego nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia u operatora lub pacjenta, a także doprowadzić do uszkodzenia produktu.

UWAGA

Umieszczane jest przed niektórymi procedurami. Jego nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

2.3. Obsługa klienta

UWAGA

Modyfikacje wyrobu nieautoryzowane przez producenta są zabronione.

UWAGA

Należy stosować WYŁĄCZNIE oryginalne części zamienne dostarczane bezpośrednio przez producenta.

Dział obsługi klienta udziela dodatkowych informacji dotyczących użytkowania, konserwacji i serwisowania wyrobu.

3. BEZPIECZEŃSTWO

3.1. Informacje ogólne

OSTRZEŻENIE

Ryzyko wybuchu lub uszkodzenia akumulatorów – urządzenie należy trzymać z dala od płomieni, źródeł zapłonu i bezpośredniego ciepła.

Ryzyko uszkodzenia podzespołów elektrycznych – należy przestrzegać podanych parametrów zasilania.

Niebezpieczeństwo przewrócenia – nie ustawiaj ani nie przemieszczaj urządzenia po powierzchniach o nachyleniu większym niż 2°.

Czynności podnoszenia i przemieszczania muszą być wykonywane przez personel przeszkolony w zakresie tego typu manewrów.

Podnośnika nie wolno użytkować w atmosferze potencjalnie wybuchowej lub palnej.

Nie używaj podnośnika do celów innych niż te, do których został przeznaczony, ani w warunkach otoczenia innych niż te, do których został zaprojektowany.

O każdym poważnym incydencie związanym z wyrobem należy powiadomić producenta oraz właściwy organ państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.


Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy podłoże odpowiada wymaganiom przewidzianym dla środowiska, w którym będzie ono użytkowane.

DIGI PROJECT Snc nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli podnośnik lub zawiesia są używane w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją.

3.2. Piktogramy

Na urządzeniu umieszczone są następujące piktogramy:

Symbol	Opis	Lokalizacja
	Ryzyko zgniecia dłoni	Ramię podnoszące
	Ryzyko zgniecia stóp	Koła tylne

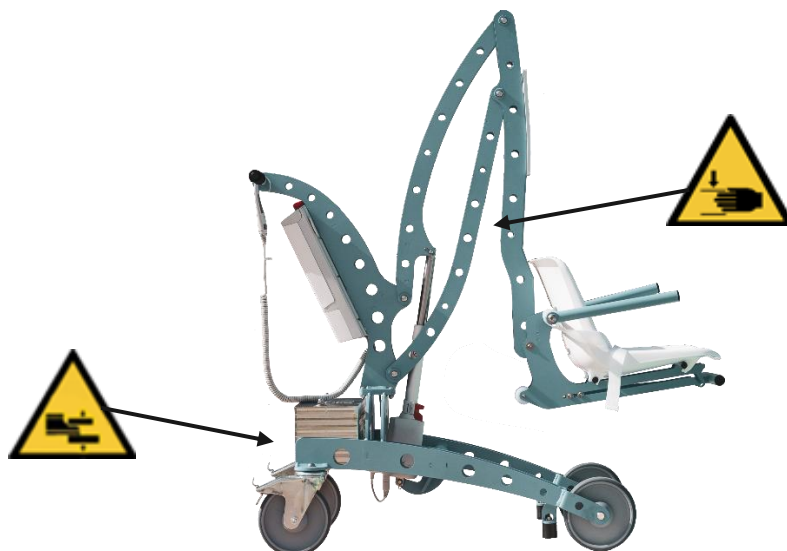

3.3. Urządzenia zabezpieczające

	Stopery bezpieczeństwa z funkcją zatrzymania ruchu – umożliwiają zatrzymanie jazdy urządzenia w przypadku przekroczenia krawędzi basenu przez koła przednie. Po zadziałaniu umożliwiają wyłącznie ruch do tyłu.
	Przycisk awaryjnego zatrzymania – umożliwia natychmiastowe zatrzymanie ruchu ramienia.


3.4. Ograniczenia użytkowania

Środowisko użytkowania urządzenia musi zapewniać:

- temperaturę w zakresie od 5°C do 40°C;
- wilgotność względną w zakresie od 30% do 95%, nieprzekraczającą 50% przy 40°C oraz 90% przy 20°C.

Maksymalne nachylenie powierzchni, po których można użytkować podnośnik:

- +/- 2° pochylenie do przodu/tyłu
- +/- 2° przechył boczny

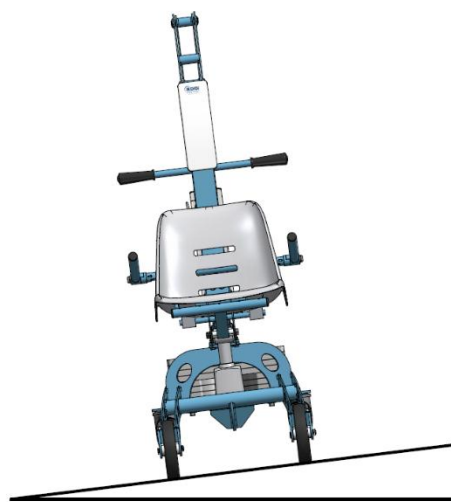

4. WPROWADZENIE

4.1. Producent

Wyrób opisany w niniejszej instrukcji jest produkowany przez:



DIGI PROJECT snc di Mariani Daniele e Giulia

Strada Provinciale Ovest, 15 – 46020 Pegognaga (MN) – Włochy

Tel. +39 0376550224

E-mail: info@digiproject.biz - www.digiproject.biz

4.2. Przewidywany okres użytkowania

Podnośnik został zaprojektowany tak, aby pracować bez ryzyka dla osób i mienia, w granicach i na warunkach określonych w niniejszej instrukcji, przez okres 10 lat. Po upływie tego okresu zaleca się wymianę urządzenia. Prawidłowe działanie wyrobu jest gwarantowane wyłącznie pod warunkiem każdorazowego kontaktu z serwisem DIGI PROJECT w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek usterki podnośnika.

4.3. Przewidziane zastosowanie

Wyrób został zaprojektowany do obsługi przez profesjonalnego operatora w celu umożliwienia przemieszczania i pozycjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową wewnątrz basenów zagłębionych w podłożu.

Środowisko użytkowania: strefy wokół basenów zagłębionych w podłożu.


Przewidziani pacjenci: osoby o wzroście co najmniej 120 cm i masie ciała co najmniej 20 kg. Osoby przewidziane do obsługi wyrobu: personel medyczny, lekarze i opiekunowie.

Podnośnika nie wolno użytkować w atmosferze potencjalnie wybuchowej lub palnej.

4.4. Identyfikacja podnośnika

UWAGA

Zabrania się usuwania etykiety z urządzenia.

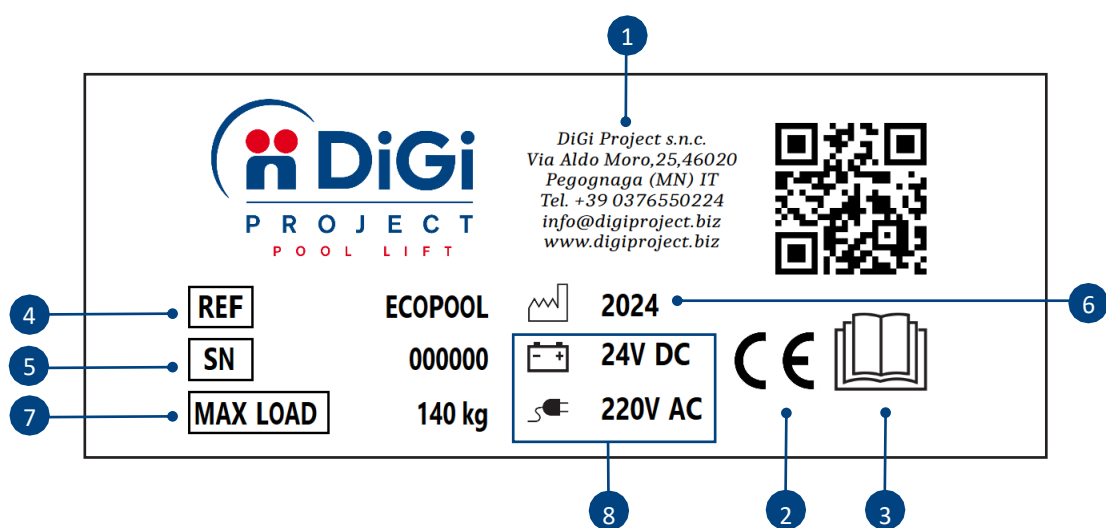

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Nazwa i adres producenta | 5. Numer seryjny |
| 2. Oznakowanie CE zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 | 6. Rok produkcji |
| 3. Przeczytaj instrukcję instalacji i obsługi | 7. Dopuszczalne obciążenie robocze |
| 4. Kod produktu | 8. Napięcie akumulatora i ładowania |

4.5. Transport i opakowanie

OSTRZEŻENIE

Czynności podnoszenia i przemieszczania muszą być wykonywane przez personel przeszkolony w zakresie tego typu manewrów.

Wyrób jest zabezpieczony pasami na palecie i zapakowany w kartony nadające się do recyklingu, które chronią go przed uszkodzeniami podczas transportu i zapewniają dostarczenie go Klientowi w stanie w pełni nienaruszonym i sprawnym.

Prawidłową procedurę rozpakowywania opisano w rozdziale dotyczącym przygotowania do użycia.

4.6. Kontrola dostawy

Produkt jest dostarczany zapakowany i gotowy do użycia. Przy odbiorze sprawdź, czy:

- opakowanie urządzenia nie zostało uszkodzone;
- urządzenie jest nienaruszone;
- obecne są wszystkie komponenty i akcesoria.

Jeśli wszystkie komponenty są nienaruszone, karton i pozostałe elementy opakowania można przekazać do recyklingu w odpowiednich punktach zbiórki.

Jeśli wyrób został uszkodzony podczas transportu, zachowaj karton i pozostałe elementy opakowania oraz postępuj zgodnie z postanowieniami zawartymi w warunkach sprzedaży.

5. OPIS OGÓLNY

5.1. Opis podnośnika

Podnośnik ECOPOOL jest wyposażony w podstawę z czterema kołami: dwoma stałymi z przodu i dwoma skrętnymi z tyłu, z nożną dźwignią hamulca.

Ramię przegubowe, przymocowane do podstawy i wyposażone w siedzisko dla pacjenta z podłokietnikami i podnóżkiem, umożliwia podnoszenie i opuszczanie pacjenta do basenu zagłębionego w podłożu za pomocą siłownika elektrycznego.

Urządzenie przemieszcza się ręcznie, natomiast ramię jest sterowane za pomocą pilota sterującego, dostępnego zarówno dla pacjenta na siedzisku, jak i dla operatora pchającego i/lub nadzorującego podnośnik. Opcjonalnie ramieniem można również sterować za pomocą przeznaczonych do tego przycisków na module sterującym, dostępnych wyłącznie dla operatora.

Ramię jest wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w części dolnej oraz ze stali nierdzewnej w części górnej, podobnie jak wszystkie pozostałe elementy metalowe, które mogą mieć kontakt z wodą.

5.2. Nazwy głównych części




1. Pionowe ramię podnoszące
2. Ramiona równoległe
3. Zagłówek
4. Uchwyt
5. Pilot sterujący
6. Siedzisko
7. Moduł sterujący

8. Podłokietniki
9. Podnóżek
10. Obciążnik
11. Siłownik elektryczny
12. Koła tylne
13. Stopery bezpieczeństwa
14. Koła przednie

5.3. Urządzenia sterujące

Podnośnik jest wyposażony w przewodowy pilot sterujący (5), który umożliwia sterowanie ramieniem podnoszącym oraz zawiera wskaźnik poziomu naładowania akumulatora (5c).

5.3.1. Pilot sterujący

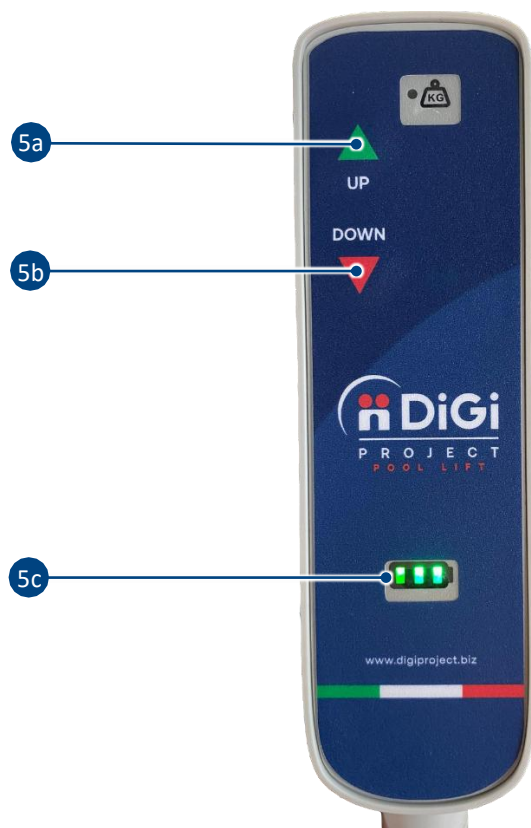

5a. Przycisk podnoszenia ramienia

5b. Przycisk opuszczania ramienia

5c. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

5.4. Specyfikacja wymiarowa

Parametr	Jedn. miary	Wartość
Masa podnośnika	kg	260
Szerokość	mm	600
Długość minimalna (podnózek złożony, ramię złożone)	mm	1320
Długość maksymalna (podnózek rozłożony, ramię rozłożone)	mm	2010
Wysokość maksymalna (ramię złożone)	mm	1560
Maksymalna wysokość siedziska (od podłoża)	mm	610
Minimalna wysokość siedziska (od podłoża)	mm	-590
Maksymalna masa ciała pacjenta	kg	140
Czas opuszczania/podnoszenia z obciążeniem	s	20

5.5. Specyfikacja elektryczna

Parametr	Jedn. miary	Wartość
Napięcie zasilania ładowarki	V	230
Częstotliwość zasilania ładowarki	Hz	50/60
Maks. pobór prądu ładowarki	A	6
Napięcie akumulatora	V	24
Czas ładowania	h	8
Stopień ochrony elektrycznej	-	IP54
Poziom hałasu	dB	<70
Autonomia (liczba cykli podnoszenia/opuszczania na jednym ładowaniu)	-	80

6. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

6.1. Przygotowanie miejsca rozpakowania

Miejsce rozpakowania musi spełniać następujące wymagania:

- obszar roboczy musi być wolny od przeszkód, a podłoże twarde (nieuginające się);
- prawidłowe oświetlenie, pozwalające uniknąć cieni i olśnienia.

6.2. Rozpakowywanie

Aby rozpakować urządzenie, postępuj następująco:


- podnieś karton opakowania, aby zdjąć go z palety;




- przetnij pasy mocujące urządzenie i rampy do palety;



- ustaw rampy zjazdowe;

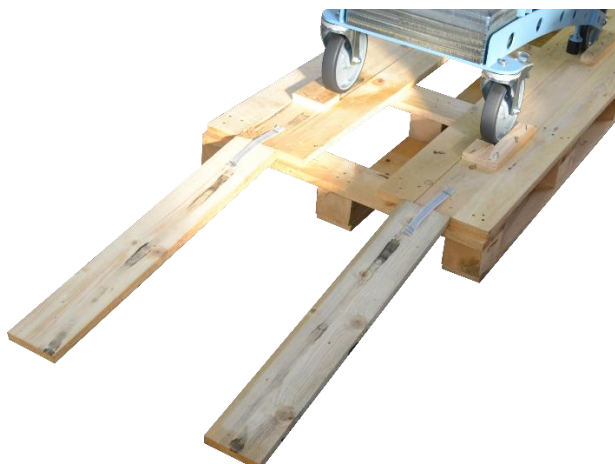

- usunąć folię (celofan) zabezpieczającą siedzisko;
- sprawdzić, czy obecne jest pudełko zawierające wymagane wyposażenie:
 - zewnętrzna stacja ładowania;
 - instrukcja obsługi;
 - pas bezpieczeństwa lub ewentualne zamówione zawiesia (opcjonalne);
 - pokrowiec przeciwpogodowy (opcjonalny);
- zwolnić hamulec nożny przy kołach tylnych (12);

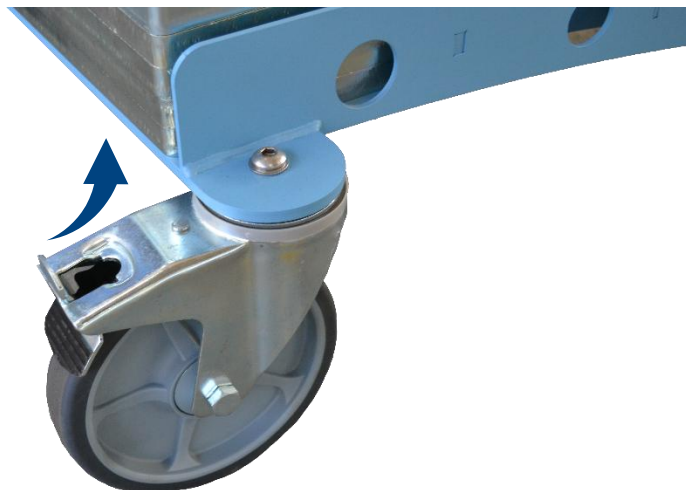

- przesunąć urządzenie do tyłu, aby zjechać nim z palety;
- przeprowadzić kontrolę funkcjonalną (6.5 „Kontrola funkcjonalna”, strona 18).

6.3. Ustawienie

Gdy urządzenie nie jest używane, należy je przechowywać w miejscu, które spełnia następujące wymagania:

- jest wyposażone w gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie ładowarki;
- zapewnia wolną przestrzeń co najmniej 120 cm z każdej strony urządzenia;
- jest suche i chronione przed czynnikami atmosferycznymi;
- ma płaskie i nieuginające się podłoże.

6.4. Ładowanie akumulatora

OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Ułóż kable tak, aby nie były narażone na zgniecenie, ciągnięcie, zagięcie ani zamoczenie.

Jeśli nie można uniknąć przejeżdżania po kablach, zastosuj najazdy kablowe.
Linia zasilająca przewidziana do podłączenia ładowarki musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA

Zabrania się usuwania etykiety z urządzenia.

Aby naładować akumulator, postępuj następująco:

[SPOSÓB 1]

- odłącz akumulator od modułu sterującego (7), pociągając za odpowiednią dźwignię:



- podłącz dostarczoną zewnętrzną stację ładowania do gniazda elektrycznego;
- umieść akumulator na stacji ładowania:



- pozostaw akumulator do ładowania przez noc lub przez równoważny czas.

[SPOSÓB 2]

- zdejmij zaślepkę z boku modułu sterującego (7) i podłącz dostarczoną ładowarkę do modułu sterującego:



- podłącz dostarczoną ładowarkę do gniazda elektrycznego;
- pozostaw akumulator do ładowania przez noc lub przez równoważny czas.

Gdy urządzenie nie jest używane, ładuj akumulator co najmniej raz w tygodniu, aby poziom naładowania nigdy nie spadł poniżej poziomu minimalnego, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia akumulatora.

6.5. Kontrola funkcjonalna

Przed użyciem urządzenia:

- sprawdź prawidłowe działanie zgodnie z rozdziałem 7 „OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE”, strona 19;
- jeśli wynik kontroli jest pozytywny, urządzenie można przekazać do normalnej eksploatacji; w przeciwnym razie skontaktuj się z działem obsługi klienta DIGI PROJECT Snc.

7. OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE

7.1. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

OSTRZEŻENIE

Podnośnika nie wolno użytkować w atmosferze potencjalnie wybuchowej lub palnej.
 Nie używaj podnośnika do celów innych niż te, do których został przeznaczony, ani w warunkach otoczenia innych niż te, do których został zaprojektowany.
 Przemieszczanie może odbywać się wyłącznie po płaskich, twardych powierzchniach, wolnych od jakichkolwiek elementów mogących stanowić przeszkody.
 Upewnij się, że w obszarze pracy urządzenia nie znajdują się inne osoby.
 Podczas użytkowania urządzenia dbaj o to, aby pacjent zawsze siedział prawidłowo.
 Nie pozostawiaj pacjenta zawieszonoego przez dłuższy czas.

UWAGA

Przed przemieszczeniem podnośnika upewnij się, że kabel zasilający jest odłączony od gniazda elektrycznego i od podnośnika.
 Nie pozostawiaj ramienia podnośnika zanurzonego w wodzie dłużej, niż jest to konieczne do podniesienia/opuszczenia pacjenta.

7.2. Przemieszczanie podnośnika

UWAGA

Do przemieszczania podnośnika używaj wyłącznie przeznaczonego do tego uchwytu.
 Operator musi zawsze znajdować się z tyłu podnośnika względem kierunku jazdy, aby kontrolować jego ruch.

Aby przenieść podnośnik, postępuj następująco:


- ustaw podnośnik prostopadle do krawędzi basenu i zatrzymaj się, gdy koła przednie (14) znajdą się w odległości około 15 cm od wody.

7.3. Przemieszczanie pacjenta

7.3.1. Umieszczanie pacjenta na siedzisku

Aby posadzić pacjenta na siedzisku (6) i zabezpieczyć go, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- ustaw siedzisko (6) na wysokości umożliwiającej łatwe posadzenie pacjenta: naciśnij i przytrzymaj przycisk podnoszenia/opuszczania ramienia, aby wyregulować wysokość siedziska;
- podnieś podłokietniki (8), aby można było łatwo umieścić pacjenta na siedzisku (6);

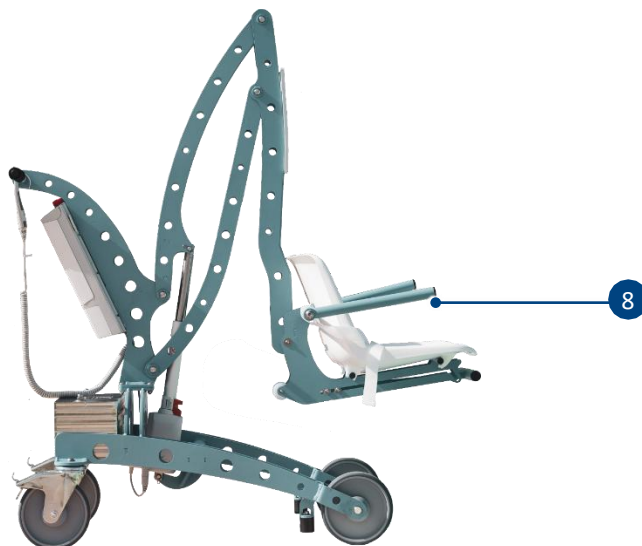

- zabezpiecz pacjenta na siedzisku (6) za pomocą dostarczonego pasa;



Aby zdjąć pacjenta z siedziska, wykonaj powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

7.3.2. Opuszczanie do basenu

Aby opuścić pacjenta do basenu, postępuj następująco:

- opuścić siedzisko (6) do wody, naciskając i przytrzymując przycisk „W dół” (5b):



- odepnij pas bezpieczeństwa pacjenta.

7.3.3. Podnoszenie z basenu

Aby podnieść pacjenta z basenu, postępuj następująco:

- opuść siedzisko (6) do wody, naciskając i przytrzymując przycisk „W dół” (5b):



- posadź pacjenta na siedzisku (6), patrz punkt „7.3.1. Umieszczanie pacjenta na siedzisku”, strona 19:



- podnieś siedzisko (6) z wody, naciskając i przytrzymując przycisk „W górę” (5a):



8. KONSERWACJA

8.1. Konserwacja i przeglądy okresowe

OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie.

UWAGA

Nie rozpylaj wody ani środków czyszczących bezpośrednio na części mechaniczne lub elektryczne urządzenia.
Nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących.

Częstotliwość	Kontrola	Czynność
Po każdym użyciu		Wyczyść urządzenie wilgotną ściereczką zwilżoną czystą wodą pitną, a następnie dokładnie je osusz.
Co miesiąc	Kontrola wzrokowa stanu zużycia kół i stoperów bezpieczeństwa	W przypadku oznak nietypowego zużycia wycofaj urządzenie z eksploatacji i skontaktuj się z serwisem producenta.
Co 6 miesięcy		Skontaktuj się z producentem w celu przeprowadzenia kontroli: • działania urządzeń zabezpieczających; • połączeń i spawów konstrukcji.

8.2. Diagnostyka i rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Czynność
Nie można podnieść/opuścić ramienia	Rozładowany akumulator	Naładuj akumulator, patrz punkt 6.4 „Ładowanie akumulatora”, strona 17
	Wciśnięty przycisk awaryjnego zatrzymania	Odblokuj przycisk awaryjnego zatrzymania, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara
	Awaria urządzeń sterujących	Skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta

9. UTYLIZACJA I ZŁOMOWANIE

Podnośnik jest wykonany ze stali malowanej lub ocynkowanej oraz z tworzyw sztucznych. Podczas utylizacji podnośnika zdemontuj poszczególne komponenty, pogrupuj je według rodzaju materiału, a następnie zutylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.1. Utylizacja odpadów

Niniejszy produkt został dostarczony przez producenta zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Produkt może zawierać substancje szkodliwe dla środowiska w przypadku jego nieprawidłowej utylizacji lub pozostawienia w nieodpowiednich punktach zbiórki, niezgodnych z przepisami prawa krajowego.

Na opakowaniu znajduje się następujące oznakowanie wymagane przez dekret ustawodawczy 116/2020.

10. GWARANCJA

10.1. Wstęp

Warunki gwarancji zostały określone w poniższych punktach, o ile w potwierdzeniu zamówienia nie wskazano inaczej.

10.2. Zakres gwarancji

DIGI PROJECT Snc udziela gwarancji na podnośnik na okres dwóch lat od daty dostawy. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne oraz wady jakościowe użytych materiałów. DIGI PROJECT Snc nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania zawartych w niniejszej instrukcji zaleceń dotyczących użytkowania i konserwacji.

Warunki gwarancji zostały określone w poniższych punktach, o ile w potwierdzeniu zamówienia lub w uzgodnieniu z producentem nie wskazano inaczej.

Wnioski o wymianę w okresie gwarancji należy przysyłać do dostawcy (producenta lub sprzedawcy) przy użyciu przeznaczonego do tego formularza zgłoszeniowego w niniejszej instrukcji, podając model i numer seryjny podnośnika.

Wymiana w ramach gwarancji nie przedłuża okresu gwarancji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z producentem. Produkty zostały zaprojektowane i wykonane z myślą o wieloletniej, bezawaryjnej eksploatacji.

Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że:

- produkt podlegający wymianie nie był naruszany przez nieupoważniony personel;
- nabywca udokumentuje, że regularnie i terminowo przeprowadzał w warsztacie serwisowym przeglądy okresowe wskazane w instrukcji użytkowania i konserwacji opracowanej przez producenta;
- wadliwe części zostaną zwrócone producentowi w celu przeprowadzenia kontroli przez producenta lub jego dostawcę, umożliwiającej uznanie gwarancji. Wadliwe części niezwrócone producentowi w ciągu 30 dni od wysyłki części zamiennej zostaną zafakturowane.

10.3. Okres gwarancji

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty faktury. Na zestaw elektryczny (akumulator, moduł sterujący i siłownik) obowiązuje gwarancja 6-miesięczna, ponieważ podnośnik musi być regularnie ładowany w celu zachowania sprawności. O ile klient i producent nie uzgodnią/inaczej, okres gwarancji wynosi 6 miesięcy. Po wykryciu usterki nabywca musi niezwłocznie powiadomić firmę, w której zakupił produkt, podając model i numer seryjny.

10.4. Procedura reklamacyjna

W celu ustalenia przyczyn zgłoszonych nieprawidłowości i usterek, a tym samym zastosowania gwarancji, konieczne jest przesłanie wadliwych komponentów do producenta. Producent uznaje wyłącznie wymianę wadliwych części w ramach gwarancji.

Koszty robocizny, dojazdu i wysyłki zwrotnej nie są objęte gwarancją. Za naprawy lub wymiany w ramach gwarancji odpowiada instalator/sprzedawca.

Naprawy na miejscu odbywają się na koszt klienta, podobnie jak źródła energii, sprzęt specjalistyczny, personel pomocniczy, koszty dojazdu oraz wyżywienie i zakwaterowanie personelu.

10.5. Zwrot materiałów

Przed wysyłką części wymagających wymiany lub naprawy w ramach gwarancji wymagana jest pisemna zgoda producenta. Wadliwe komponenty muszą być odpowiednio zapakowane, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu, i zwrócone producentowi wraz z:

- dokumentem przewozowym
- numerem seryjnym i modelem produktu
- dokładnym opisem stwierdzonej wady oraz okoliczności wystąpienia problemu.
- Na życzenie producenta należy wcześniej przesłać zdjęcia i filmy w celach pomocniczych. Komponenty uznane w ramach gwarancji są dostarczane klientowi bezpłatnie.

10.6. Wyłączenia z gwarancji

Z gwarancji wyłączone są:

- nieprzestrzeganie kontroli eksploatacyjnych urządzenia oraz odpowiednich przeglądów okresowych wskazanych w instrukcji;
- nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania i konserwacji produktu;
- materiały i komponenty podlegające normalnemu zużyciu (takie jak części z tworzyw sztucznych, naklejki i tuleje) oraz te, których żywotności nie można określić z góry;
- przypadki, gdy wada lub usterka jest bezpośrednim lub pośrednim następstwem zaniedbania, nieostrożnego użytkowania, niewłaściwego użytkowania, wypadków, upadków i uderzeń;
- przypadki, gdy wada lub usterka jest bezpośrednim lub pośrednim następstwem ingerencji w produkt, nieprawidłowej instalacji lub nieprawidłowego użytkowania;
- przypadki, gdy wada jest następstwem nieprawidłowej konserwacji i/lub napraw, lub zastosowania komponentów innych niż oryginalne komponenty producenta;
- przypadki, gdy akumulator był używany w wysokich temperaturach, pozostawiony bez ładowania, rozładowany poniżej dopuszczalnego limitu, przeładowany lub używany z przekroczeniem granicznej liczby cykli ładowania/rozładowania;
- produkty, z których usunięto tabliczkę znamionową lub na których została ona zmieniona;
- produkty, w których brakuje numeru seryjnego lub został on zmieniony.

Powyższe wyłączenia skutkują natychmiastową utratą gwarancji.

11. KARTA PRZEGLĄDÓW URZĄDZENIA

INSTALACJA			
Technik	Data	Uwagi	Podpis
KONSERWACJA			
Technik	Data	Uwagi	Podpis

[illegible]



Digi Project Snc

Strada Provinciale Ovest, 15

46020 Pegognaga (MN) WŁOCHY

Tel.: +39 0376 550224 – info@digiproject.biz

www.digiproject.biz