



INFORMACJE DOT. UŻYTKOWANIA (pl)

=> wyrób medyczny: system siedziskowy

FROGGO

(wersja Std / rozmiary: MINI, STD, MAXI, MAXI-XLG)



Produkcja i Dystrybucja:

PATRON Bohemia a.s.
Českolipská 3419, 27601 Mělník, Czechy
tel.: +420-315 630 111
[http:// www.patron.eu](http://www.patron.eu)

SCHEMA



Specyfikacja techniczna:	FROGGO MINI	FROGGO STD	FROGGO MAXI	FROGGO MAXI-XLG
Wysokość oparcia (mm)	450-570	510-680	550-770	610-790
Głębokość siedziska (mm)	(185) 200-270	230-330	290-400	340-450
Szerokość siedziska (mm)	230-300	250-340	270-380	270-380
Odległość od siedziska do podnóżka (mm)	120-280	120-360	120-390	120-430
Wysokość podłokietnika (mm)	160-210	200-270	200-270	200-270
Nachylenie podłokietnika	+15°/-15°	+15°/-15°	+15°/-15°	+15°/-15°
Nachylenie oparcia	90°-180°	90°-180°	90°-180°	90°-180°
Nachylenie siedziska	+42°/-3°	+40°/-5°	+41°/-4°	+41°/-4°
Nachylenie stopki podnóżka	-9°/+14°	-9°/+14°	-9°/+14°	-9°/+14°
Całkowita długość (mm)	800	800	800	800
Całkowita szerokość (mm)	570	570	570	570
Całkowita wysokość (mm)	1030	1120	1120	1200
Wysokość uchwytu do pchania (mm)	regulowana	regulowana	regulowana	regulowana
Masa całkowita (kg)	16,7	17,4	18,5	20,0
Maksymalne obciążenie (kg)	40,0	40,0	50,0	50,0
Hamulec	Aktyw. stopą	Aktyw. stopą	Aktyw. stopą	Aktyw. stopą

OPIS SCHEMATU

1. Uchwyt do pchania
2. Oparcie
3. Pałak przedni
4. Podnózek
5. Podwozie
6. Panele boczne
7. Peloty biodrowe
8. Podłokietnik
9. Lewy pedał do regulacji nachylenia siedziska
10. Prawy pedał do regulacji wysokości siedziska
11. Płytki regulacyjne siły sprężyny


Obr. 1




Obr. 2




Obr. 3

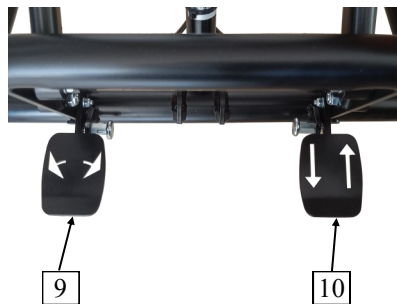


Obr. 4

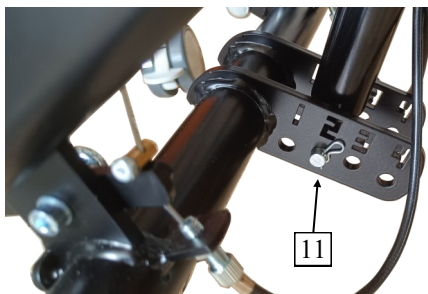

Obr. 5

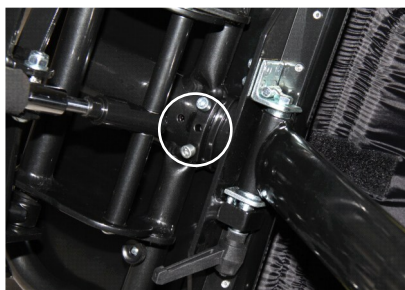

Obr. 6

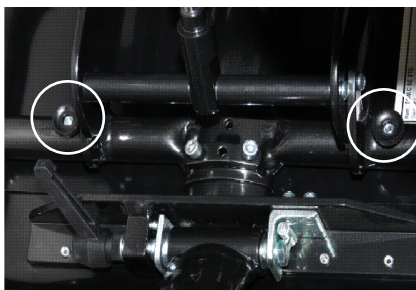

Obr. 7



Obr. 8



Obr. 9




Obr. 10



Obr. 11



Obr. 12

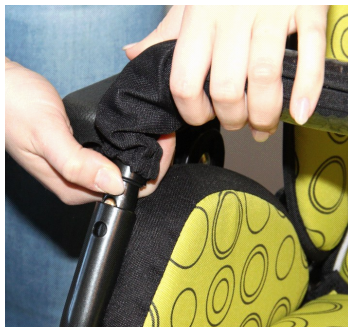

Obr. 13



Obr. 14



Obr. 15



Obr. 16



Obr. 17



Obr. 18



Obr. 19



Obr. 20



(Informacje dot. użytkowania - data ostatniej aktualizacji: 21.08.2025)

WPROWADZENIE:

Szanowni Państwo, prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem wyrobu. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wyrobu i jego prawidłowego użycia, należy skontaktować się z profesjonalnym personelem lub centrum serwisowym. Wszelkie poważne zdarzenia niepożądane związane z wyrobem lub pogorszenie stanu zdrowia użytkownika w związku z użytkowaniem wyrobu należy niezwłocznie zgłaszać oficjalnemu dystrybutorowi wyrobu w Państwa kraju lub producentowi wyrobu. Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i/lub usunięcia tego produktu, a także deklarację zgodności produktu, proszę skontaktować się z oficjalnym dystrybutorem wyrobu w swoim kraju lub producentem. Należy zachować niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.



..... OSTRZEŻENIE, UWAGA



.....maksymalne obciążenie.

OSTRZEŻENIE! Podczas używania wózka należy trzymać palce z dala od ruchomych części.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki! Nawet jeśli pasy i hamulce są w użyciu.

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie mechanizmy blokujące są prawidłowo zablokowane i czy wszystkie elementy zabezpieczające są prawidłowo użyte.

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem należy sprawdzić, czy fotelik jest prawidłowo przymocowany do płyty mocującej na ramie.

OSTRZEŻENIE! Fotelik nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.

OSTRZEŻENIE! Siedzisko nie może być używane w pojazdach silnikowych jako fotelik samochodowy.

OSTRZEŻENIE! Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem wózka, a także zachować ją na przyszłość. Bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone, jeśli nie będą Państwo przestrzegać wskazówek i uwag dotyczących bezpieczeństwa wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi.

WYRÓB - OPIS, CECHY, IDENTYFIKACJA:

Otrzymali Państwo wyrób, który jest przeznaczony do wszechstronnego codziennego użytku wewnątrz domu. Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z jego obsługą, sposobem obchodzenia się z nim i działaniem wszystkich funkcji, aby uniknąć możliwości odniesienia obrażeń. W szczególności prosimy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Wszyscy użytkownicy i/lub osoby im towarzyszące muszą zostać przeszkoleni przez wykwalifikowany personel w zakresie obsługi wyrobu. Użytkownicy i / lub osoby im towarzyszące są zobowiązani do zapoznania się w szczególności z ryzykiem szczerzkowym związanym z tym produktem, w związku z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa podanymi w niniejszej instrukcji.
- Wyrób został dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowe zmiany mogą być wprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Zalecamy indywidualne dostosowywanie wyrobu raz w roku, aby zapewnić optymalną konfigurację wyrobu dla użytkownika. Szczególnie w przypadku użytkowników ze zmieniającą się anatomią (np. wymiary ciała i waga) zaleca się dostosowanie co najmniej raz na sześć miesięcy.
- Państwa konkretny wyrób może różnić się od przedstawionych tutaj wariantów. W szczególności nie wszystkie opcjonalne akcesoria opisane w niniejszej instrukcji są zamontowane w Państwa wyrobie.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w konstrukcji opisanej w niniejszej instrukcji.

Cechy wyrobu:

Ten wyrób jest sklasyfikowany jako nieinwazyjny wyrób medyczny klasy 1. Wyrób jest przeznaczony do użytku krótko- i długoterminowego. Wyrób jest kontrolowany przez osobę towarzyszącą i służy do transportu dzieci z pomocą drugiej osoby. Wyrób jest przeznaczony do stosowania na twardej powierzchni wewnątrz pomieszczeń. Wyrób jest przeznaczony dla dzieci z tymczasowym lub trwałym ograniczeniem zdolności chodzenia, niezdolnych do chodzenia lub utrzymywania pozycji stojącej. Wyrób jest odpowiedni dla użytkowników, których anatomia (np. wymiary ciała i waga) pozwala na używanie wyrobu w określonym celu i których skóra jest nienaruszona. Produkt może być używany wyłącznie w połączeniu z akcesoriami określonymi w formularzu zamówienia.

Producent tego wyrobu nie ponosi odpowiedzialności za kombinacje z wyrobami medycznymi i/lub akcesoriami innych producentów. Dozwolone są wyłącznie kombinacje produktów ocenione pod względem skuteczności i bezpieczeństwa. Takie połączenie wyrobu i akcesoriów musi być dozwolone i określone w umowie dotyczącej połączenia produktów.

Wskazania: od łagodnych do poważnych aż po całkowite ograniczenia ruchów użytkownika.

Przeciwwskazania: Przeciwwskazania bezwzględne nie są znane. Względne przeciwwskazania - brak fizycznych lub psychicznych warunków wstępnych, znaczne uszkodzenie tkanki powierzchniowej (np. skóry itp.).

Zjawiska towarzyszące: W wyjątkowych przypadkach podczas korzystania z wyrobu mogą wystąpić następujące zjawiska towarzyszące - ból mięśni szyi, ból mięśni i stawów, zaburzenia krążenia, ryzyko odleżyn. W przypadku wystąpienia tych zjawisk towarzyszących lub problemów, proszę skontaktować się z lekarzem lub terapeutą.

Identyfikacja wyrobu:

Informacje na etykiecie produktu:

	Globalny handlowy numer identyfikacyjny. Zgodnie ze standardem GS1 = UDI-DI - Unikalny Identyfikator Wyrobu - Identyfikator Wyrobu.
	Numer seryjny. Zgodnie ze standardem GS1 = UDI-PI - Unikalny Identyfikator Wyrobu - Identyfikator Produkcji.
	Identyfikacja producenta - wersja produktu
Mod.:	Wersja produktu / tekst
Spec.:	Wersja produktu / wersja kolorystyczna
	Producent - adres

Data produkcji: Numer seryjny (pierwsze 3 cyfry) zawiera datę produkcji. ("253" = 253 miesiące od 01.01.2000 = styczeń 2021)

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA:

- Osoba obsługująca musi być zaznajomiona z niniejszą instrukcją.
- Przed użyciem należy zasięgnąć profesjonalnej porady medycznej dotyczącej przydatności tego wyrobu.
- Przed opóźdem należy zawsze upewnić się, że dziecku jest wygodnie, a ubrania, kocyki itp. są schowane, aby nie wpadły pod koła.
- Wózek NIE MOŻE być używany jako fotelik dla dziecka podczas podróży pojazdem silnikowym lub autobusem.
- Przed przystąpieniem do regulacji wózka należy upewnić się, że dziecko znajduje się z dala od ruchomych części, aby uniknąć obrażeń.
- Podczas ustawiania nachylenia i regulacji siedziska oraz oparcia należy postępować ostrożnie, aby uniknąć nagłych niekontrolowanych ruchów.
- Zmiana kierunku siedzenia musi być wykonana bez pasażera i z pustym siedziskiem.
- Nie pozwalać dziecku na samodzielne wsiadanie i wysiadanie z wózka.
- Podczas czynności wsiadania i wysiadania z wózka należy zawsze włączać hamulce postojowe.
- Wózek nie jest przeznaczony do jazdy po schodach.
- Proszę upewnić się, że akcesoria stabilizujące, barierka zabezpieczająca i inne elementy są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.
- Nie stawiać na podnóżku.
- Hamulce muszą być aktywne przez cały czas, gdy wózek się nie porusza.
- Najpierw proszę poćwiczyć pokonywanie krawężników z pustym wózkiem.

- Osoba obsługująca wózek musi podjąć środki ostrożności przeciwko zagrożeniu pożarowemu. W budynkach należy sprawdzić lokalizację wyjść przeciwpożarowych i upewnić się, że procedury są zrozumiałe.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się wózkiem ani wieszać się na nim.
- Podczas jazdy należy zachować pełną ostrożność, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji lub kolizji.
- Nie przeciążać wózka. Przeciążenie podwozia, siedziska, torby lub kosza powoduje zmniejszenie stabilności wózka.
- Podczas manewrowania wózkiem należy zachować pełną ostrożność, aby nie zranić dziecka ani siebie.
- Jeśli to możliwe, należy zawsze korzystać z podjazdów lub wind, aby pokonać wszelkie ograniczenia utrudniające dostęp.
- Wózek należy zawsze podnosić we dwie osoby.
- Nigdy nie należy przenosić wózka, jeśli użytkownik i/lub pomocnik nie są pewni, czy mogą bezpiecznie przenieść wózek z dzieckiem.
- Podczas jazdy wózkiem po drogach należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
- Proszę nie używać wózka do celów innych niż te, do których został zaprojektowany.
- Wózek jest przeznaczony do przewożenia tylko jednego dziecka.
- Nie należy używać innych niż oryginalne akcesoria PATRON przeznaczone dla tego wyrobu.
- Podczas składania i rozkładania wózka należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi, aby uniknąć uszkodzeń konstrukcji, które mogłyby wpłynąć na stabilność wyrobu.
- W przypadku widocznej wady, która ogranicza bezpieczne użytkowanie wyrobu (np. uszkodzenie podwozia, odpadnięcie części lub inne wizualnie widoczne wady, pęknięcia itp.) należy natychmiast zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się z lokalnym oficjalnym dystrybutorem lub centrum serwisowym.
- Firma PATRON nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z innych niż oryginalne akcesoria PATRON dostarczone przez tę firmę.
- Firma PATRON nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego wyrobu.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA:

Do montażu systemu siedziskowego FROGGO potrzebny jest klucz imbusowy 4 mm. Potrzebny będzie również klucz płaski 10 mm; klucz ten nie jest dołączony do zestawu.

Do regulacji systemu siedziskowego FROGGO używaj klucza imbusowego, który znajduje się w kieszeni zapinanej na rzep z tyłu siedziska. .

Siedzisko:

Montaż / demontaż siedziska

Montaż: Zahamuj podwozie. Umieść siedzisko na podwoziu tak, aby otwory w ramie siedziska dokładnie pokrywały się z odpowiednimi otworami w podwoziu. (Obr. 1) Przykręć siedzisko pewnie do podwozia. (Obr. 2) Zawsze sprawdź, pociągając siedzisko do góry, czy zostało prawidłowo zamocowane.

Upewnij się, że peloty biodrowe, osłony boczne ramy oraz tapicerka podłokietników są prawidłowo założone.

Demontaż: Zahamuj podwozie. Odkręć siedzisko od podwozia. Zwolnij siedzisko i zdejmij je.

Regulacja kąta nachylenia siedziska

Przesuń zabezpieczenie pod pedałem, obróć je, a następnie ponownie wciśnij zatrzask zabezpieczający. Trzymając oparcie obiema rękami, naciśnij lewy pedał, aby uruchomić mechanizm pochylenia siedziska, i ustaw żądany kąt.

Następnie zwolnij pedał. (Obr. 3, poz. 9)

Regulacja wysokości siedziska

Przesuń zabezpieczenie pod pedałem, obróć je, a następnie ponownie wciśnij zatrzask zabezpieczający. Trzymając oparcie obiema rękami, naciśnij prawy pedał, aby zwolnić mechanizm regulacji wysokości siedziska. Ustaw siedzisko na żądanej wysokości, a następnie zwolnij pedał. (Obr. 3, poz. 10)

OSTRZEŻENIE! Siłownik podnoszący siedzisko jest przeznaczony do podnoszenia obciążenia do 50 kg. Jeżeli użyjesz pedału regulacji wysokości bez obciążenia, siedzisko może bardzo gwałtownie unieść się do góry. W takim przypadku istnieje ryzyko urazu lub uszkodzenia mechanizmu podnoszenia.

Regulacja głębokości siedziska :

Odepnij tapicerkę siedziska, odpinając rzep. Za pomocą klucza imbusowego poluzuj dwie śruby znajdujące się pod spodem siedziska. (Obr. 5)

Poluzuj również cztery plastikowe nakrętki na spodzie siedziska. (Obr. 6)

Ustaw wymaganą głębokość siedziska. Następnie dokręć śruby kluczem imbusowym oraz plastikowe nakrętki ręcznie. Załóż z powrotem tapicerkę siedziska.

Regulacja szerokości siedziska

Odepnij tapicerkę siedziska po bokach siedziska (rzepy). Poluzuj cztery plastikowe nakrętki na spodzie siedziska. (Obr. 6)

Przesuń panele boczne, aby ustawić wymaganą szerokość siedziska. Dokręć płyty boczne za pomocą czterech nakrętek. Załóż z powrotem tapicerkę siedziska.

Regulacja kąta oparcia:

Poluzuj dźwignię z tyłu oparcia. (Obr. 7)

Ustaw oparcie w żądanej pozycji i zabezpiecz je, dokręcając dźwignię. W razie potrzeby lekko rozepnij tapicerkę wspornika oparcia, aby ułatwić regulację.

Sprawdź, czy oparcie jest prawidłowo zablokowane w ustawionej pozycji. Oparcie nie powinno samoczynnie zmieniać kąta.

Regulacja wysokości oparcia:

Poluzuj tapicerkę oparcia zarówno z tyłu (rzep), jak i z przodu (rzep). Za pomocą klucza imbusowego poluzuj dwie śruby (Obr. 8), a następnie ręcznie poluzuj dwie plastikowe nakrętki z tyłu oparcia. (Obr. 9)

Wysuwając lub wsuwając, ustaw żadaną wysokość oparcia. Następnie dokręć śruby kluczem imbusowym oraz plastikowe nakrętki ręcznie. Załóż z powrotem tapicerkę oparcia. (Obr. 10)

Regulacja siły sprężyny

Aby wyregulować siłę sprężyny podnoszącej, wysuń trzpień i zabezpiecz sprężynę trzpieniem w wybranej pozycji. Im wyższy numer, tym większa siła podnoszenia. (Obr. 4, poz. 11)

Regulacja elementów:

Peloty biodrowe :

Montaż: Zamocuj peloty biodrowe za pomocą plastikowych uchwytów do pionowych rur po bokach oparcia. (Obr. 11)

Demontaż - Przesuń peloty biodrowe w kierunku oparcia i zdejmij plastikowe uchwyty z rur.

Podłokietniki:

Podłokietniki są regulowane. Wysokość podłokietników można ustawić przez poluzowanie śrub, wysunięcie lub wsunięcie podłokietników, a następnie ponowne dokręcenie śrub kluczem imbusowym. Kąt podłokietników można ustawić, poluzowując dźwignię i naciskając na jedną stronę podłokietnika. Prawidłowe położenie kątowe jest sygnalizowane kliknięciem. Po ustawieniu właściwego kąta podłokietników należy koniecznie dokręcić dźwignię. Głębokość podłokietników można ustawić, poluzowując dźwignię, następnie przesuwając podłokietniki do jednego z trzech otworów i ponownie dokręcając dźwignię. (W wersji MINI możliwa jest wyłącznie regulacja wysokości podłokietników). Aby zamocować tapicerkę podłokietników, załóż je i zapnij rzep.

Pałak przedni:

Aby zdjąć pałak przedni, wcisnij dwa metalowe trzpienie blokujące do wnętrza rur. Następnie wysuń pałak do góry. Podczas montażu trzpienie blokujące muszą być skierowane do przodu. Wsuń pałak do odpowiednich rur, aż zatrzaśnie się na trzpieniach blokujących. (Obr. 12)

Pociągnij pałak do góry i upewnij się, że został prawidłowo zamocowany.

Regulacja kąta podnóżka :

Poluzuj dźwignię znajdującą się pod spodem siedziska, ustaw żądany kąt podnóżka, a następnie zabezpiecz pozycję, dokręcając dźwignię. (Obr. 13)

Regulacja długości podnóżka :

Za pomocą klucza imbusowego poluzuj dwie śruby z tyłu rury podnóżka. (Obr. 14)

Wysuń lub wsuń podnóżek odpowiednio do potrzeb, aby ustawić jego długość. Następnie dokręć śruby kluczem imbusowym.

Regulacja kąta stopki podnóżka :

Za pomocą klucza imbusowego poluzuj dwie śruby znajdujące się pod spodem stopki podnóżka. Przesuń prostokątną stopkę tak, aby po złożeniu zatrzymywała się pod wymaganym kątem. (Obr. 15)

Następnie dokręć śruby kluczem imbusowym.

Rzep stabilizujący nogi :

Za pomocą rzepu znajdującego się pod spodem podnóżka zabezpiecz jego pozycję, aby zapobiec przypadkowemu złożeniu. (Obr. 16)

Tapicerka:

Tapicerka jest zdejmowana i może być prana ręcznie w temperaturze maks. 40°C.

Tapicerka oparcia :

Nasuń tapicerkę na oparcie. Dolną część tapicerki przełóż przez szczelinę między oparciem a poduszką siedziska i przymocuj ją rzepami z przodu i z tyłu oparcia. (Obr. 17)

Tapicerka siedziska:

Załóż tapicerkę na siedzisko i dociśnij rzepy. (Obr. 18)

Tapicerka paneli bocznych:

Nasuń tapicerkę na przednią stronę paneli bocznych tak, aby kolorowa powłoka zawsze znajdowała się po wewnętrznej stronie siedziska. (Obr. 19)

Akcesoria opcjonalne :

Produkt oferowany jest z szeroką gamą specjalnych akcesoriów stabilizujących i pozycjonujących. Instrukcję dotyczącą tych akcesoriów można znaleźć w osobnej broszurze.

Obsługa systemu siedziskowego FROGGO:

Przestrzeganie poniższych instrukcji umożliwi długotrwałe użytkowanie produktu bez konieczności korzystania z serwisu.

Hamulec postojowy

Hamowanie: Po całkowitym zatrzymaniu można zaciągnąć hamulec, naciskając dźwignię przy podwoziu. Aby sprawdzić, czy podwozie jest prawidłowo zahamowane, spróbuj lekko poruszyć nim do przodu i do tyłu. (Obr. 20)
Uwolnienie hamulca: Unieś dźwignię hamulców. Podwozie zostanie odblokowane.

Usadzanie dziecka :

Zahamuj podwozie. Aby ułatwić usadzenie dziecka, zaleca się poprosić zaufaną osobę o przytrzymanie podwozia. Ostrożnie posadź dziecko w siedzisku, zapnij wszystkie elementy stabilizujące, w które wyposażony jest system siedziskowy FROGGO, zamocuj pałąk przedni i ustaw podnóżek w żądanej pozycji. Upewnij się, że dziecko zawsze siedzi wygodnie.

Wymowanie dziecka :

Zahamuj podwozie. Aby ułatwić wyjęcie dziecka, złóż podnóżek i poproś zaufaną osobę o przytrzymanie podwozia. Odepnij wszystkie elementy stabilizujące, w które wyposażony jest system siedziskowy FROGGO, zdejmij pałąk przedni i ostrożnie wyjmij dziecko z wózka.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie podnoś produktu, trzymając wyłącznie za pałąk przedni, podnóżek lub siedzisko.

KONSERWACJA, UTYLIZACJA WYROBU:

System siedziskowy został zaprojektowany zgodnie z najbardziej wymagającymi standardami dlatego właściwe użytkowanie i konserwacja przyczynią się do wielu lat bezawaryjnego użytkowania .

- Należy upewnić się, że są Państwo zaznajomieni z obsługą wózka. Wózek powinien zawsze łatwo się rozkładać i składać. Jeśli tak nie jest, nie forsować mechanizmu - należy przerwać i przeczytać instrukcję.
- Regularnie sprawdzać blokady zabezpieczające, dopasowanie barierki zabezpieczającej, zaczepów, podnóżek i mocowanie śrub aby upewnić się że są dobrze zamocowane i sprawnie działają.
- Hamulce, koła, opony i tapicerka podlegają zużyciu i w razie potrzeby powinny zostać wymienione przez centrum serwisowe.
- Jeśli wózek jest uszkodzony lub wymaga jakiegokolwiek naprawy, tylko autoryzowane centra serwisowe mogą świadczyć takie usługi naprawcze.
- Do napraw należy używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych przez firmę PATRON.
- Jeśli części wózka staną się sztywne lub trudne w obsłudze, należy upewnić się, że przyczyną nie jest brud, a następnie nałożyć niewielką ilość smaru w sprayu, np. WD 40 (nie używać oleju ani tłuszczu). Należy upewnić się, że środek smarny wniknął między elementy, ale nie rozpylać go zbyt dużo, ponieważ może to sprzyjać gromadzeniu się brudu. Należy wytrzeć nadmiar smaru. Regularne smarowanie ruchomych części przedłuży żywotność wózka i ułatwi jego rozkładanie i składanie.
- Nie wystawiać wózka na długotrwałe intensywne promieniowanie słoneczne
- Elementy tekstylne wózka i/lub akcesoriów muszą być używane i przechowywane w taki sposób, aby przezroczyste plastikowe części nie były ciasno złożone lub skręcone. Mogą one ulec uszkodzeniu, jeśli temperatura spadnie o 5°C poniżej zera.
- Koła oraz części plastikowe i metalowe można czyścić gąbką z ciepłą wodą i łagodnym detergentem.
- Materiał fotelika należy prać ręcznie w maksymalnej temperaturze 40°C, nie używać suszarki do prania.
- Nigdy nie czyścić środkami ściernymi, na bazie amoniaku, wybielaczami i środkami czyszczącymi na bazie alkoholu.
- Po wystawieniu na działanie wilgoci, proszę wytrzeć wózek miękką szmatką i pozostawić w pełni rozłożony w ciepłym i suchym miejscu.
- Przechowywać wózek w suchym, bezpiecznym miejscu o zalecanej temperaturze 5-20°C.
- Zaleca się, aby wózek był sprawdzany przez autoryzowany serwis co 12 miesięcy.
- Zalecamy, aby po 24 miesiącach odwiedzić serwis.
- Należy regularnie sprawdzać i dokręcać złącza śrubowe.
- Jeśli używane są kable sterowania (hamulce, teleskopy, pochylenie), należy je regularnie sprawdzać i w razie potrzeby ustawić i naoliwić.

Żywotność produktu: Przewidywany okres użytkowania produktu wynosi 5 lat. Przewidywany okres użytkowania produktu został wykorzystany jako podstawa do opracowania produktu i określenia wymagań dotyczących użytkowania produktu w danym celu. Dane te obejmują również wymagania dotyczące konserwacji w celu zapewnienia wymaganej skuteczności i bezpieczeństwa wyrobu.

Informacje dotyczące utylizacji: W celu utylizacji, wyrób należy zutylizować zgodnie z lokalnymi obowiązującymi przepisami ochrony środowiska w kraju, w którym wyrób był używany.

WARUNKI GWARANCJI:

1. Wyrób jest objęty 24 miesięczną gwarancją liczoną od dnia zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i technologiczne.
2. Wyrób może być używany tylko i wyłącznie do celu w jakim został zaprojektowany, instrukcja użytkowania musi być przestrzegana.
3. Wyrób musi być właściwie używany, konserwowany i przechowywany zgodnie z instrukcją użytkowania.
4. Nie ściągać etykiety identyfikacyjnej. Musi ona być czytelna i nieuszkodzona przez cały okres gwarancji.
5. Zgłoszenia gwarancyjne należy dokonać u sprzedawcy, u którego wyrób został zakupiony. Prawdopodobnie wypełniona "Karta gwarancyjna" oraz dowód zakupu muszą zostać dołączone do zgłoszenia gwarancyjnego. Każdą wadę należy zgłosić natychmiastowo.
6. Procedura reklamacyjna może być rozpoczęta kiedy wózek zostanie dostarczony w całości i w oryginalnym opakowaniu, zapakowany starannie i zabezpieczony od uszkodzeń. Właściciel jest zobowiązany do dostarczenia wózka wyczyszczonego, wymytego i w zgodzie z podstawowymi zasadami higieny. Podstawowa konserwacja i czyszczenie nie może być wymagane w zgłoszeniu gwarancyjnym.
7. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń spowodowanych przeciążeniem wózka, użyciem siły, nieuprawnionymi zmianami konstrukcyjnymi wózka lub wyposażenia dodatkowego oraz naturalnego zużywania się części w szczególności zabrudzeń i uszkodzeń tapicerki, zużycia części plastikowych, hamulców, bieżnika opon oraz przebieg opon.
8. W przypadku zaistnienia poniższych sytuacji następuje utrata gwarancji: użytkownik nie stosuje się do zasad użytkowania, konserwacji i przechowywania wymienionych w instrukcji użytkowania lub kiedy produkt jest serwisowany przez jednostki inne niż autoryzowane centra serwisowe lub kiedy naklejka identyfikacyjna nie jest umieszczona na wózku i jednocześnie na karcie gwarancyjnej.
9. Okres gwarancji nie jest równy okresowi użytkowania to oznacza, że wózek prawidłowo użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i właściwie konserwowany może służyć znacznie dłużej niż wynosi okres gwarancji.
10. Ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty i obrażenia spowodowane użytkowaniem wyrobu niezgodnie z zasadami zawartymi w "Instrukcji użytkowania".

Producent, PATRON Bohemia a.s., zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach.

NOTATKI:

UCZESTNIK ŁAŃCUCHA DYSTRYBUCJI / SCHEMAT IDENTYFIKACYJNY

PATRON Bohemia a.s. Českolipská 3419, Mělník, CZ (www.patron.eu) Producent - kontrola końcowa produktu / nazwa: Podpis:	Etykieta identyfikacyjna produktu:		
<u>Importer / dystrybutor w UE :</u> (Nazwa, adres, dane kontaktowe) Wyłączny dystrybutor w Polsce: MOBILEX Sp. z o.o. ul. Duńska 3/5, Łódź tel.: 42 214 29 11; fax.: 42 214 14 05 www.mobilex.pl ; info@mobilex.pl	Importer / dystrybutor w UE (pieczętka):		
<u>Punkt sprzedaży / Partner serwisowy :</u> (nazwa, adres, dane kontaktowe)	Punkt sprzedaży / Partner serwisowy (pieczętka):		
<table><tr><td data-bbox="60 1340 468 1366"> Data zakupu (dzień, miesiąc, rok): </td><td data-bbox="472 1340 1055 1388"> Nazwa (drukowanymi literami), numer telefonu, pieczętka i podpis sprzedawcy: </td></tr></table>		Data zakupu (dzień, miesiąc, rok):	Nazwa (drukowanymi literami), numer telefonu, pieczętka i podpis sprzedawcy:
Data zakupu (dzień, miesiąc, rok):	Nazwa (drukowanymi literami), numer telefonu, pieczętka i podpis sprzedawcy:		