


Chodząca rama

DYNAMICZNY


DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

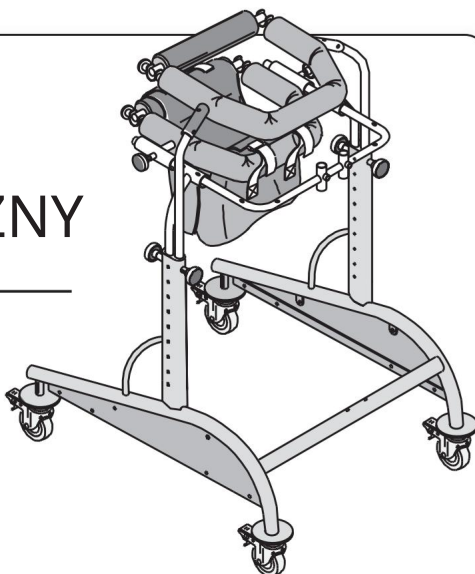

Chodząca rama

DYNAMICZNY

DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ

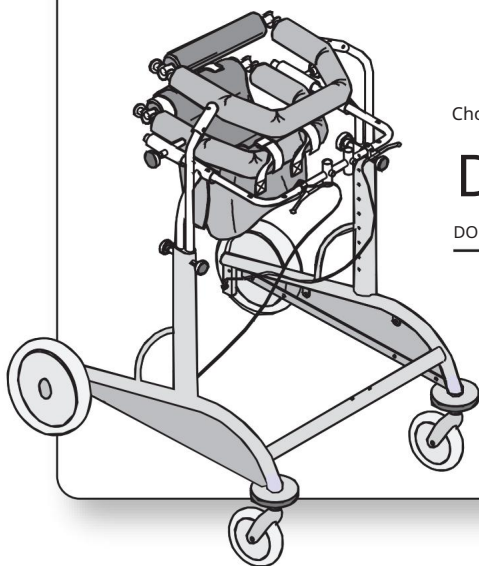

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

ORMESA dziękuje za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli wybierając nasz chodzik DYNAMICO .

DYNAMICO to balkonik, w którym dbałość o funkcjonalność łączy się z poszanowaniem zasad ergonomii i bezpieczeństwa.

ORMESA zaleca uważne przeczytanie niniejszego podręcznika, aby w pełni zrozumieć jego treść. Pomoże on Państwu szybko i skuteczniej zapoznać się z systemem DYNAMICO , a także zawiera wiele praktycznych porad, jak korzystać z niego bezpiecznie i w optymalny sposób, a także utrzymać jego pełną wydajność.

Korzystając z naszych porad pomożemy Ci osiągnąć cel rehabilitacji, do którego została stworzona ta pomoc.

Jeśli nadal masz coś do dopytania lub wyjaśnienia, nie wahaj się skontaktować ze swoim dealerem, który chętnie udzieli Ci wszelkiej niezbędnej pomocy, lub zadzwoń bezpośrednio do ORMESA. Nasz numer telefonu to +39 0742 22927, numer faksu to +39 0742 22637, a adres e-mail to: info@ormesa.com.

Zespół Ormesa

Strona 2 / 31



OSTRZEŻENIA

- § Chodzik DYNAMICO dostępny jest w dwóch modelach: do użytku wewnątrz pomieszczeń (dostępny w 5 rozmiarach) i na zewnątrz (dostępny w 4 rozmiarach). Należy wymienić pomoc, gdy użytkownik podrośnie.
- § Przed użyciem chodzika należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, ponieważ została ona napisana dla Państwa bezpieczeństwa oraz w celu ułatwienia Państwu nauki prawidłowego użytkowania i konserwacji produktu. Instrukcja stanowi integralną część produktu i należy ją starannie przechowywać do wykorzystania w przyszłości.
- § Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla sprzedawców, asystentów sprzedawców detalicznych i użytkowników. Zawiera on instrukcje dotyczące prawidłowego stosowania produktu i musi być uzupełniony odpowiednią wiedzą technika przepisującego lek.
- § Podręcznik odzwierciedla rodzaj techniki stosowany w momencie wprowadzenia pomocy na rynek. ORMESA srl ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZEPROWADZENIA WSZELKICH MODYFIKACJE W POMOCY I JEJ PODRĘCZNIKU , które mogą wynikać z doświadczenia, względów technicznych lub zmiany norm. Modyfikacje te będą wprowadzane bez konieczności aktualizacji poprzedniej produkcji i jej podręczników.
- § Lek DYNAMICO musi być przepisywany przez LEKARZA SPECJALISTĘ, który również sprawdzi jego używać
- § Zajęcia DYNAMICO muszą być prowadzone przez osoby o odpowiednim wzroście i budowie ciała, umożliwiającej kontrolę ruchów.
- § Korzystanie z DYNAMICO (i jego komponentów) musi odbywać się pod kontrolą Lekarza zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.
- § DYNAMICO może być używany wyłącznie przez osoby, które dokładnie zapoznały się z instrukcją określone w tym podręczniku
- § Szkolenie z zakresu obsługi DYNAMICO musi być przeprowadzone w ośrodkach rehabilitacyjnych pod okiem wykwalifikowanego personelu
- § Chodzik powinien być używany przez osoby, których wymiary i waga ciała odpowiadają tym podanym w paragrafie „DANE TECHNICZNE” na stronach 8 i 9.
- § Przed każdym użyciem DYNAMICO sprawdź, czy wszystkie regulowane części są dobrze zablokowane.

§ Zawsze blokuj hamulce podczas zatrzymywania się, nawet na płaskim terenie

§ Zawsze blokuj hamulce przed regulacją jakiegokolwiek części

§ Zawsze upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód, które mogłyby spowodować nieprawidłowe działanie DYNAMICO. podpórki, takie jak maty, stopnie i różne przedmioty na podłodze

§ Usuń wszelkie drobiazgi i przedmioty, które mogą spaść podczas użytkowania DYNAMICZNY

§ Uważaj na niebezpieczne miejsca! Twoje dziecko może poruszać się szybko

§ Czyścić DYNAMICO zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Konserwacja” strona 25-29.

§ Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać , aby zawsze była dostępna.

UWAGA! Użyte materiały nie są OGNIODOPORNE. Trzymaj chodzik z dala od źródeł zapłonu (kominków, papierosów itp.).

UWAGA! Akcesorium 824 TRANSPARENT TRAY jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wolno go używać na zewnątrz, ponieważ może to utrudniać obsługę urządzenia i ograniczać jego widoczność.

- Przed każdym użyciem zawsze sprawdź skuteczność hamulców, zużycie kół, działanie mechanizmów blokujących regulację oraz ogólnie wszystkie elementy, które mogą się poluzować z czasem i w zależności od użytkowania. W przypadku zauważenia spadku wydajności skontaktuj się z zaufanym warsztatem ortopedycznym, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konserwacji na stronach 25 i 26.

DYNAMICO JEST MECHANICZNYM URZĄDZENIEM MEDYCZNYM:



Wykonuj REGULARNĄ KONSERWACJĘ i

CZYSZCZENIE zgodnie z instrukcją podaną w

Rozdział „Konservacja” na stronie 25-26-27-28-29 i

ZLEĆ KONTROLĘ URZĄDZENIA W

WSKAZANE ODSŁĘPY CZASU, KTÓRE POZWOLĄ SPRAWDZIĆ, czy to jest

DZIAŁA POPRAWNIE i W DOBRYM STANIE, w przeciwnym razie gwarancja nie

będzie ważna, a oznaczenie straci ważność **CE**



Naprawy produktu inne niż standardowa konserwacja przedstawiona

na stronach 25-26-27-28-29 instrukcji mogą być wykonywane WYŁĄCZNIE

przez wyspecjalizowanego specjalistę.

CENTRUM SERWISOWE w zakresie konserwacji pomocy mechanicznych dla

osób niepełnosprawnych, w przeciwnym razie gwarancja i oznakowanie
zostaną unieważnione **CE**



Jakiegokolwiek ZMIANY w produkcie i

ZAMIANA BEZ CZĘŚCI ORYGINALNYCH

LUB KOMPONENTY NIE SĄ AUTORYZOWANE.

NALEŻY ODNOSIĆ SIĘ WYŁĄCZNIE DO ORMESA, w przeciwnym razie gwarancja i

CE oznakowanie zostaną unieważnione



W przypadku WĄTPLIWOŚCI co do BEZPIECZEŃSTWA produktu lub USZKODZENIA
części lub podzespołów, prosimy o kontakt z _____

NATYCHMIAST PRZERWAĆ UŻYWANIE i

SKONTAKTUJ SIĘ Z SPECJALISTYCZNYM CENTRUM SERWISOWYM zajmującym
się konserwacją pomocy mechanicznych dla osób niepełnosprawnych
lub bezpośrednio z ORMESA



GWARANCJA

ORMESA udziela 2-letniej gwarancji na produkt; w razie problemów prosimy o kontakt ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Zawsze pytaj o oryginalne części i akcesoria.

ORMESA nie ponosi odpowiedzialności za szkody w następujących przypadkach:

- użytkowania przez osobę nieodpowiednią;
- nieprawidłowy montaż części lub akcesoriów;
- nieautoryzowanych modyfikacji lub usług;
- stosowania innych niż oryginalne części zamienne i części ulegające zużyciu (tapicerka, koła, itp);
- niewłaściwego użytkowania (np. przewożenia przedmiotów lub ładunków większych lub cięższych niż pokazane na rysunku instrukcja obsługi);
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania i braku regularnej konserwacji, jak pokazano na instrukcja obsługi;
- wydarzenia wyjątkowe;
- nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH, które ulegają naturalnemu zużyciu, np. tapicerki i kół.



JAK PRZECHOWYWAĆ I TRANSPORTOWAĆ WYRÓB MEDYCZNY

URZĄDZENIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ I PAKOWAĆ, używając oryginalnych materiałów opakowaniowych firmy Ormesa. URZĄDZENIE MUSI BYĆ ZAWSZE DOŁĄCZONE DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI, chyba że gwarancja zostanie unieważniona.

Po rozpakowaniu TRANSPORT URZĄDZENIA NALEŻY WYKONAĆ PRZESZKŁOBIENIE

Odpowiednio do pojazdu

Podczas podróży samolotem lub samochodem NIE NARAŻAJ ZŁOŻONEJ RAMY NA

ŁADUNKI, KTÓRE, ZWŁASZCZA W PRZYPADKU WYBOJÓW NA DRODZE, MOGĄ USZKODZIĆ JEGO KONSTRUKCJĘ

URZĄDZENIE NALEŻY PARKOWAĆ/PRZECHOWYWAĆ W ZAMKNIĘTYM I SUCHYM MIEJSCU

ŚRODOWISKO PRACY NIE MA SZCZEGÓLNEGO WPŁYWU NA URZĄDZENIE, CHYBA ŻE JEST ONE UŻYWANE NIEPRAWIDŁOWO, np.

przez pozostawienie go na dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym lub wystawienie na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, bądź w ŚRODOWISKU MORSKIM, gdzie słone powietrze może spowodować korozję farby i
przesuwanych części.

W TYM PRZYPADKU ZALECA SIĘ DOKŁADNE WYCYSZCZENIE I OSUSZENIE RAMY, POSTĘPUJĄC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PODANYMI W ROZDZIALE „KONSERWACJA I CZYSZCZENIE” NA STRONACH 25-26-27-28-29 ORAZ OSTRZEŻENIAMI NA STRONIE 27





CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ PODCZAS KORZYSTANIA Z DYNAMICO

DYNAMICO NIE MOŻE BYĆ UŻYWANE, JEŚLI NIE JEST TO CZŁONKIEM RODZINY LUB

OSOBA WYKWALIFIKOWANA JEST OBECNA PRZEZ CAŁY CZAS

NIE WYKONUJ ŻADNYCH OPERACJI ANI MANEWRÓW, JEŚLI NIE JESTEŚ

PEWNOŚĆ REZULTATU: W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM SERWISEM TECHNICZNYM
SERWIS LUB SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z PRODUCENTEM

NIGDY NIE UŻYWAJ DYNAMICO NA NIERÓWNYM PODŁOŻU, STROMYM ZBOCZU LUB SCHODACH

NIGDY NIE POZWÓL NIEZNANYM OSOBOM UŻYWAĆ DYNAMICO, NAWET W CELU GRY
Z TYM

NIGDY NIE ZOSTAWIAJ UŻYTKOWNIKA SAMEGO Z DYNAMICO

NIGDY NIE ZOSTAWIAJ PRODUKTU ZAINSTALOWANEGO NA POCHYLEJ POWIERZCHNI

NIGDY NIE ZOSTAWIAJ PRODUKTU ZAINSTALOWANEGO PRZEZ DŁUŻSZY CZAS W

BEZPOŚREDNIEGO WYSTAWIENIA NA ŚWIATŁO SŁONECZNE LUB ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W POBLIŻU ŹRÓDEŁ CIEPŁA: UNIKNIESZ
PRZEGRZANIE URZĄDZENIA I PRZEBARWIECIE TAPICERKI

NIE UŻYWAJ PRODUKTU, JEŚLI BRAKUJE JEDNYCH CZĘŚCI LUB SĄ USZKODZONE.


NALEGAJ, ABY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH

PONIEWAŻ KAŻDY INNY TYP UNIEWAŻNI GWARANCJĘ I OZNAKOWANIE



NIE UŻYWAJ TACKI 824 NA ZEWNĄTRZ. MOŻE TO OGRANICZYĆ MOŻLIWOŚĆ PORUSZANIA SIĘ CHODZIKIEM, WIDOCZNOŚĆ I
WPŁYWAĆ NA BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA.

ETYKIETY I TABLICZKI

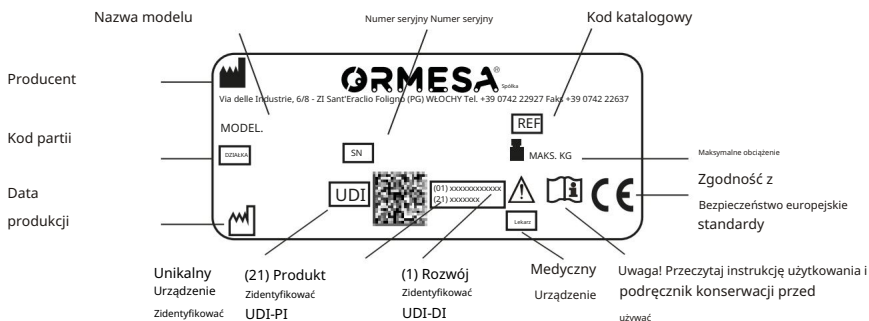

TO WYROB MEDYCZNY JEST IDENTYFIKOWANY ZA POMOCĄ UDI (UNIQUE DEVICE IDENTIFIER), ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2017/745 ORAZ KODEM PRZEPISÓW
FEDERALNYCH (CFR, USA) TYTUŁ 21. UDI TO STANDARDOWY KOD, KTÓRY UMOŻLIWIA ŚLEDZENIE I UNIKALNĄ IDENTYFIKACJĘ WYROBU W CAŁYM JEGO CYKLU ŻYCIA.

OZNAKOWANIE CE POTWIERDZA, ŻE DYNAMICO SPEŁNIA WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA
WYMAGANIA określone w ROZPORZĄDZENIU (UE) 2017/745 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
PARLAMENTU I RADY z dnia 5 kwietnia 2017 r. mające zastosowanie do WYROBÓW MEDYCZNYCH



DANE TECHNICZNE INDOOR DYNAMICO

Rama stalowa, chromowana, lakierowana epoksydem, nietoksyczna ; -

Wyścielane podparcie miednicy, regulowane na wysokość, a także do przodu i do tyłu;


- Wyścielane podparcie klatki piersiowej, regulowane na wysokość i wyjmowane;

- Szelki wykonane z podwójnej grubości materiału , z regulacją wysokości. Posiadają paski i klamry do regulacji wysokość i pasek rzepowy do regulacji obwodu;


- kółka jezdne o średnicy 8 cm , każde z podwójnym hamulcem;

- Półelastyczne odbojniki z PVC chroniące przed uderzeniami;


- Dostępny w 5 ROZMIARACH.

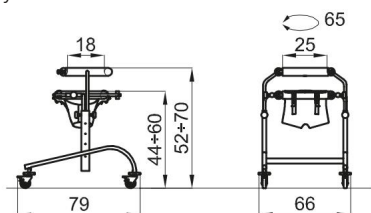


DYNAMICO 1 MASA POMOCY Kg,12 MAKS. ŁADUNEK kg 55

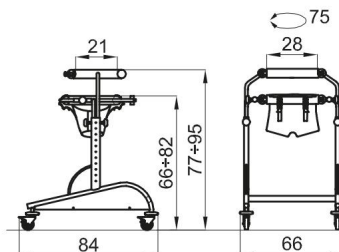

DYNAMICO 2 MASA POMOCY Kg,14,6 MAKS. ŁADUNEK kg 70

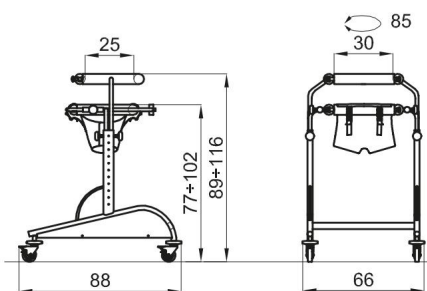


DYNAMICO 3 MASA POMOCY Kg,15,6 MAKS. ŁADUNEK kg 85

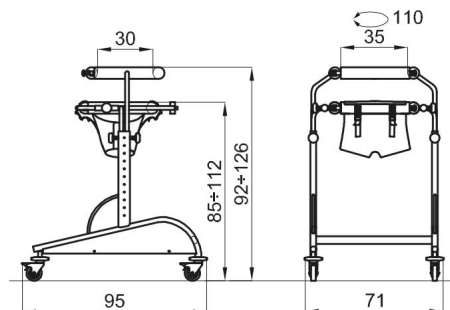

DYNAMICO 4 MASA POMOCY Kg,17

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE kg 100

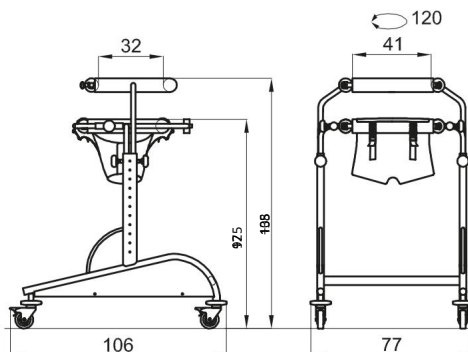

DYNAMICO 5 MASA POMOCY Kg,19,7 MAKS. ŁADUNEK kg 115



Wymiary w cm

LICZBY ROZDZIELONE MYKAMI OZNACZAJĄ
MINIMALNY I MAKSYMALNY ZAKRES
MODYFIKACJA




DANE TECHNICZNE OUTDOOR DYNAMICO

- Rama ze stali chromowanej, lakierowana nietoksyczną żywicą epoksydową ;
- Wyściełane podparcie miednicy, regulowane na wysokość, a także do przodu i do tyłu;
- Wyściełane podparcie klatki piersiowej, regulowane na wysokość i wyjmowane;
- Szelki wykonane z podwójnej grubości materiału , z regulacją wysokości. Posiadają paski i klamry do regulacji wysokość i pasek rzepowy do regulacji obwodu;
- Koła nieprzebijalne , przednie koła obrotowe, cm. 17, tylne koła stałe, cm. 3
- Półelastyczne odbojniki z PVC chroniące przed uderzeniami;
- Hamulce ręczne ;
- Dostępny w 3 ROZMIARACH.

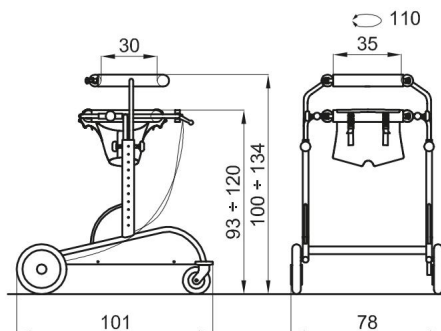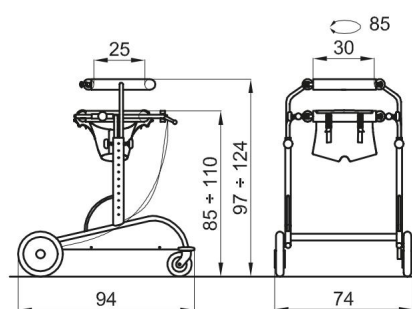

DYNAMICO 3 MASA POMOCY kg.19,3 MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE kg 85 DYNAMICO 4 MASA POMOCY kg.20,4 MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE kg 100

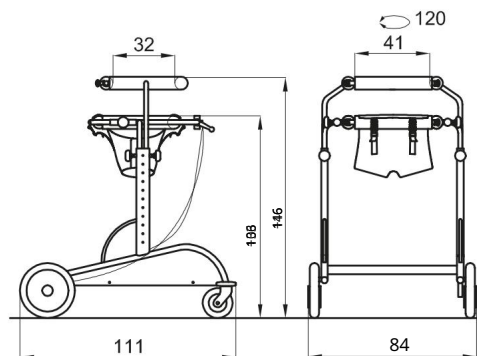


DYNAMICO 5 MASA POMOCY Kg.22,7 MAKS. ŁADUNEK kg 115

Wymiary w cm
LICZBY ROZDZIELONE MYKAMI OZNACZAJĄ
MINIMALNY I MAKSYMALNY ZAKRES
MODYFIKACJA



PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE

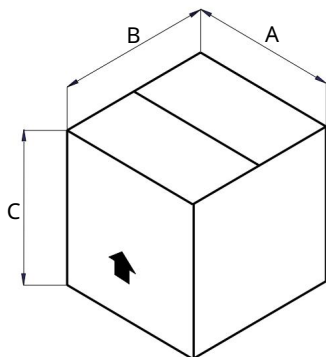


INFORMACJE O OPAKOWANIU
DYNAMIKI WEWNĘTRZNEJ

Chodząca rama	A cm	B cm	C cm	TOM m3	WAGA kg
DYNAMICZNY 1	78	65	50	0,253	15
DYNAMICO 2	80	80	84	0,537	18
DYNAMICZNY 3	85	80	93	0,632	19
DYNAMICZNY 4	85	80	93	0,632	21
DYNAMICZNY 5	103	82	107	0,903	24

INFORMACJE O OPAKOWANIU
ZEWNĘTRZNEJ DYNAMIKI

Chodząca rama	cm	B cm	C cm	TOM m3	WAGA kg
DYNAMICZNY 3	102	78	43	0,342	24
DYNAMICZNY 4	102	78	43	0,342	27
DYNAMICZNY 5	102	78	43	0,342	29

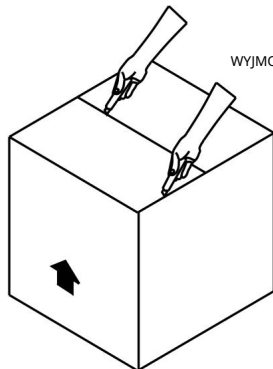


WYJMOWANIE DYNAMICO Z OPAKOWANIA



STRZEC SIĘ!



PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ABY NIE WYTRZYMYWAĆ ZBYT DUŻEGO
NACISKANIA PODCZAS ROZCINANIA PUDEŁKA. MOŻE TO SPOWODOWAĆ
USZKODZENIE POMOCY DO CHODZENIA.

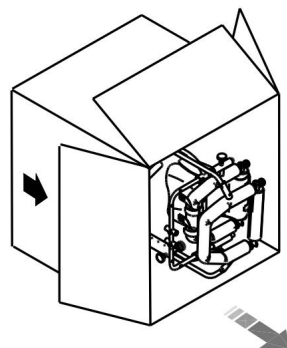

ODWRÓĆ KARTON DO GÓRY NOGAMI Z OSTROŻNOŚCIĄ I
WYJMIJ DYNAMICO BEZ PODGRZEWANIA




JAK ZŁOŻYĆ
DYNAMIKA WEWNĘTRZNA

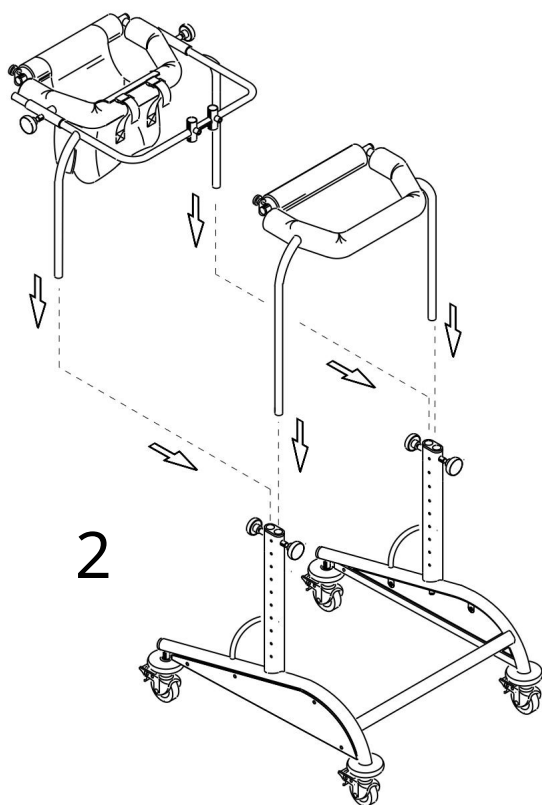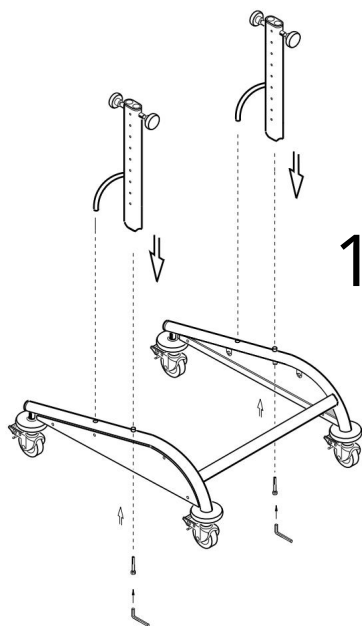





MONTAŻ KOŁA TYLNEGO DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO DYNAMICO-5

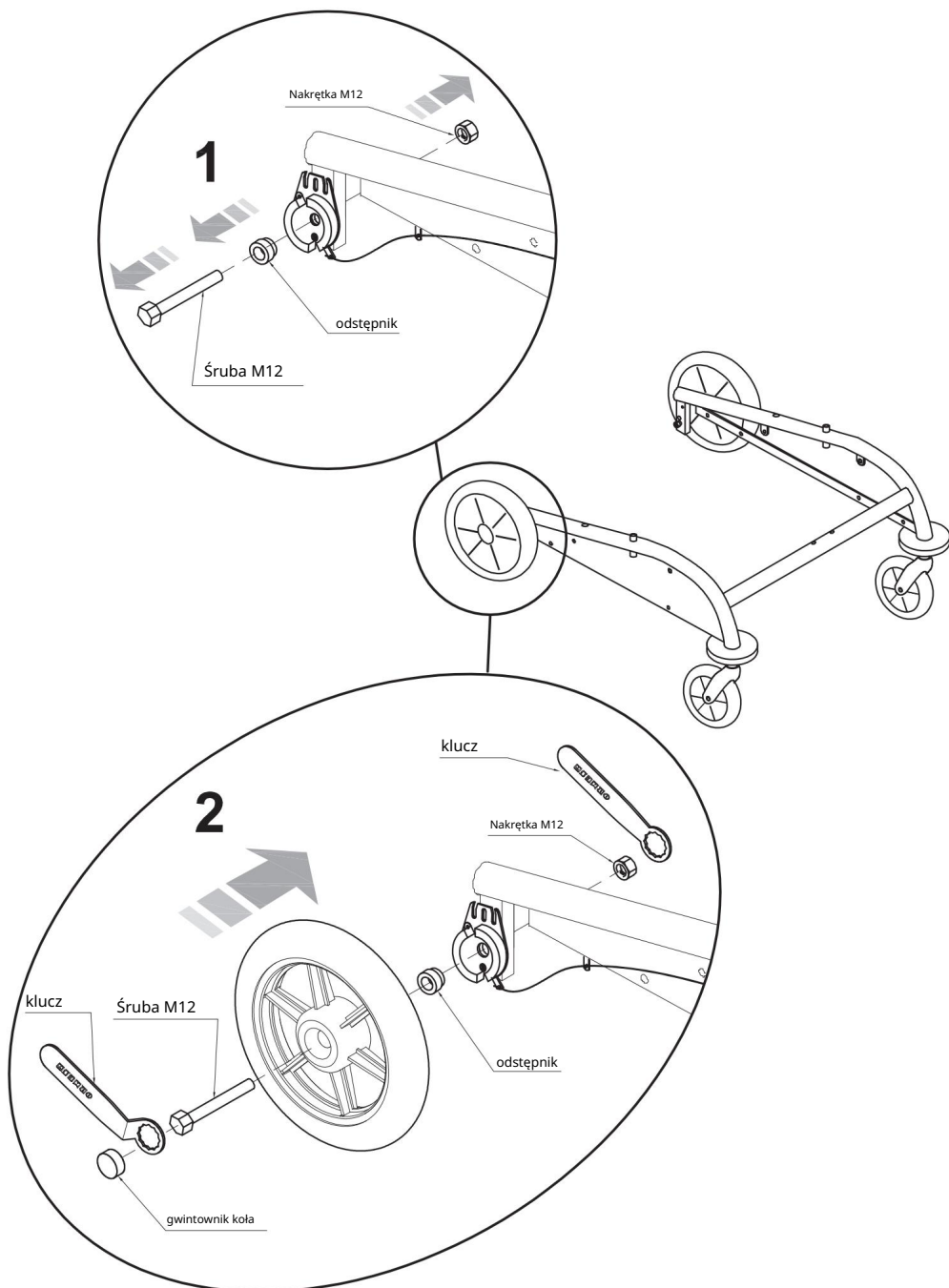



JAK ZŁOŻYĆ
OUTDOOR DYNAMICO

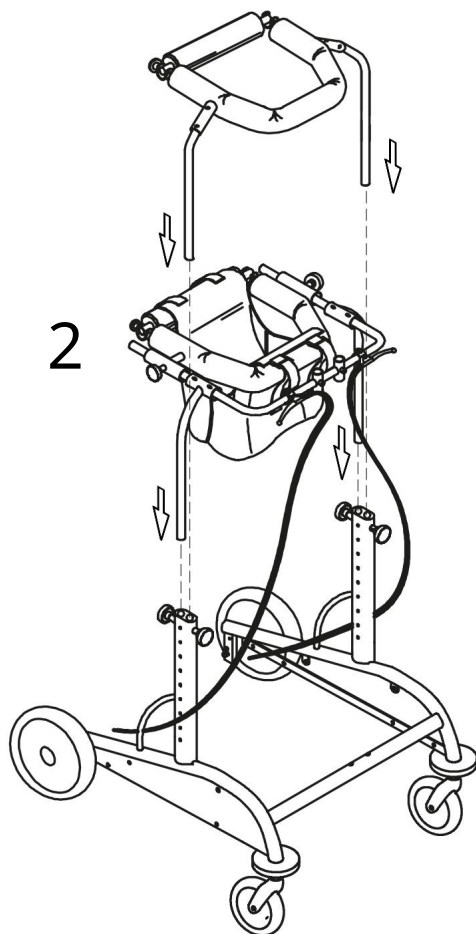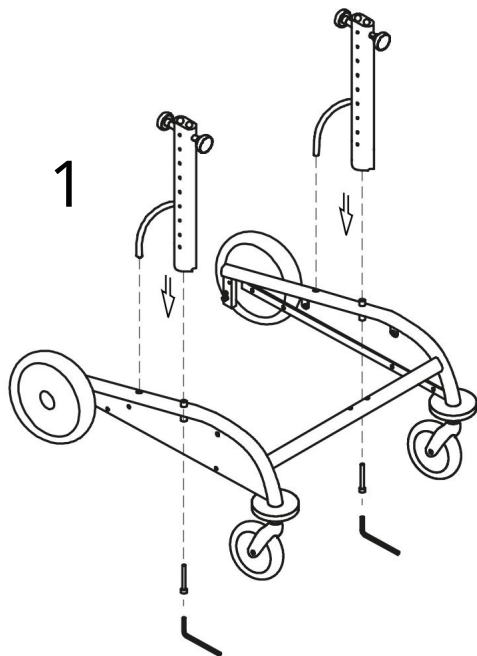



CZYM JEST DYNAMICO

DYNAMICO to pomoc do chodzenia, czyli urządzenie zaprojektowane w celu ułatwienia Użytkownikowi poruszania się na swoim własny.

Składa się z:

A. ramy sztywnej

B. kółka jezdne


aby ułatwić ruch w różnych kierunkach.

C. podparcie miednicy D.

podparcie klatki piersiowej

Podpórki CD można stosować razem lub oddzielnie, w zależności od możliwości fizycznych Użytkownika. warunki.

Y. Szelki materiałowe z paskami i klamrami do regulacji wysokości i paskiem rzepowym do regulacji obwodu.

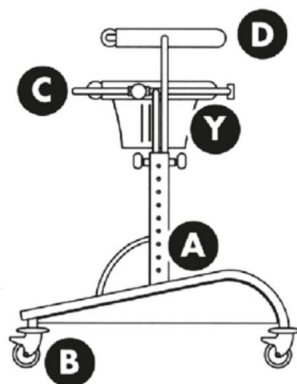

Rys. 1

DO CZEGO SŁUŻY DYNAMICO

DYNAMICO zostało zaprojektowane i wykonane, aby:

umożliwia Użytkownikowi chodzenie bez pomocy, gdy samodzielne chodzenie jest niemożliwe; trenuje i rozpoczyna proces chodzenia tak, aby można było go kontynuować bez pomocy na dłuższym etapie; może być używany do ćwiczenia czynności chodzenia lub po prostu jako stały środek przemieszczania się.


Przypominamy, że chodzenie to po prostu ruch ciała w pozycji wyprostowanej z jednego punktu w przestrzeni do drugiego, co jest możliwe dzięki: sposobowi chodzenia (naprzemienne zginanie i

prostowanie każdej nogi); utrzymywaniu równowagi tułowia i miednicy, najpierw na obu stopach, a następnie na jednej podczas poruszania się; świadomości przestrzeni i odległości.

Dlatego DYNAMICO jest stosowane:

b) generowanie i wspomaganie wzoru kroków (rys. 2);

b) ćwiczyć utrzymanie równowagi tułowia i miednicy (rys. 3) Rys.3

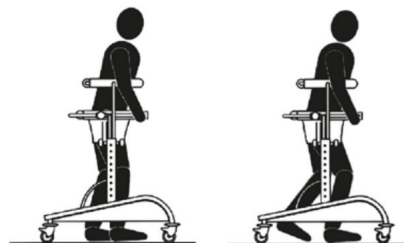

Rys.2




Rys. 3




c) zorganizować szerszą, ustrukturyzowaną wizję przestrzeni, odległość i otoczenie Użytkownika w pozycji pionowej;

d) umożliwienie realizacji „projektów” i „działań” zaplanowane, na przykład z możliwością zobaczyć obiekt, pomyśleć o jego zastosowaniu, pracować nad nim ruch w celu dotarcia do obiektu i jego użycia (Rys. 4 - 5);

e) rozwijać samowystarczalność fizyczną i niezależność psychologiczną eksperymentowanie z możliwością działania w pojedynkę bez pomocy innych osób.

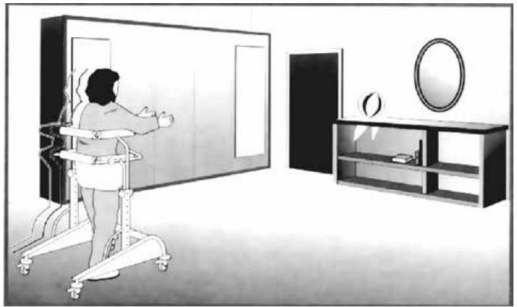

Rys. 4

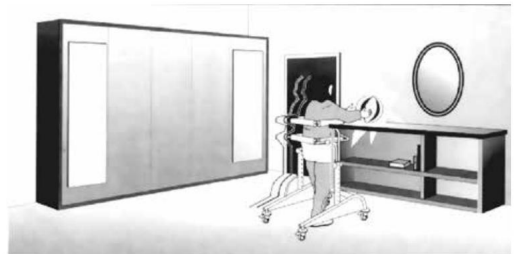

Rys. 5

JAK DZIAŁA DYNAMICO I JAK GO UŻYWAĆ

DYNAMICO jest prosty i bezpieczny w użyciu. Jego podstawa opiera się na szerokiej powierzchni, co kompensuje brak równowagi, dzięki czemu Użytkownik może wykorzystać niewielką siłę, jaką posiada, do poruszania kołami.


Mimo że DYNAMICO jest urządzeniem prostym i bezpiecznym w użyciu, należy przejść odpowiednie szkolenie w ośrodku rehabilitacyjnym.

Poniższe informacje pomogą Ci w jak najlepszym wykorzystaniu tej pomocy.

Dostosowanie pomocy

Po założeniu aparatu (rys. 6) należy zamknąć i zablokować część tylną oraz ustawić następującą wysokość:

- podparcie klatki piersiowej (rys. 7);
- podparcie miednicy (rys. 8);
- uprząż (rys. 9);

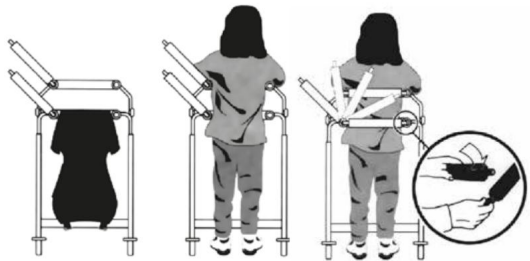

Rys. 6



Rys. 7



Nie ma z góry ustalonej pozycji!

Każda pozycja musi być dostosowana do Użytkownika i modyfikowana w zależności od jego rozwoju fizycznego, zmiany jego sytuacji motorycznej i programu rehabilitacji.

Mówiąc ogólnie , odległość podpór od podłoża musi pozwalać użytkownikowi jedynie na dotknięcie podłogi (tak, aby tylko część ciężaru dziecka spoczywała na jego stopach), przy lekkim zgięciu miednicy i kolan.

Następnie odległość ta będzie stopniowo zmniejszana , tak aby waga dziecka była stopniowo, po trochu, aż stanie pewniej na nogach, a jego dolne kończyny będą bardziej proste.



Rys. 9


Kolejnym krokiem jest prawidłowe ustawienie dwóch podpór (rys. 9). Jest to ważna i delikatna operacja, ponieważ od niej zależy prawidłowe ustawienie tułowia względem miednicy.

Za pomocą pokręteł K ustaw podparcie miednicy i przesunąć je do przodu lub do tyłu.


Idealna pozycja to taka, w której ramiona, tułów i biodra są ustawione w linii.

Odsunięcie podparcia miednicy do tyłu względem podparcia klatki piersiowej i oparcie rąk na kierownicy powoduje przesunięcie środka ciężkości do przodu, stymulując w ten sposób chodzenie. Pozycji tej nie

należy forsować, w przeciwnym razie może przynieść odwrotny skutek (rys. 10).

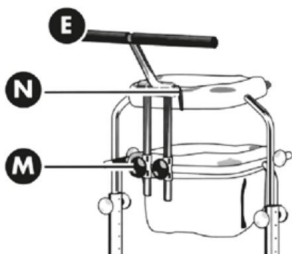

Rys. 11

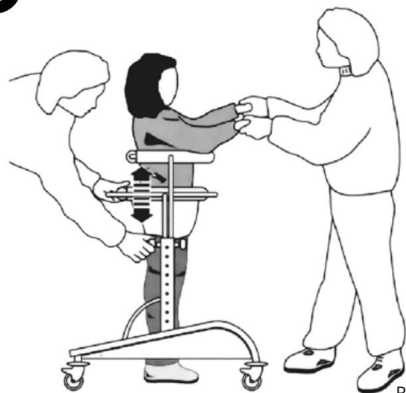


Rys. 8

Podparcie miednicy powinno być dopasowane wokół wyższej części miednicy.

Wsparcie miednicy i ciężaru stóp można zwiększać lub zmniejszać poprzez regulację pasów i rzepów na uprząży.

Wysokość podparcia klatki piersiowej zwykle dostosowuje się do zdolności dziecka do kontrolowania ruchu tułowia (jeśli dziecko dobrze kontroluje tułów, podparcie klatki piersiowej powinno być niskie); nawet w takim przypadku warto postępować krok po kroku, zaczynając od podparcia pod pachami, a następnie stopniowo je obniżając.

Jeżeli Użytkownik ma wystarczającą kontrolę nad tułowiem, podparcie klatki piersiowej można usunąć (rys. 3).

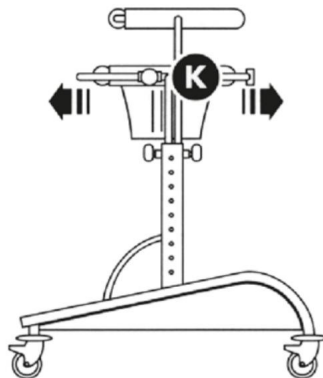

Rys. 10

Kierownicę E (akcesorium, rys. 11) należy wyregulować w zależności od tego, jak bardzo Użytkownik musi zginać lub prostować ramiona, aby pchać i prowadzić DYNAMICO.

Do regulacji pionowej użyj pokręteł M. Sprawdź, czy pokrętła M są dobrze dokręcone.

Do regulacji poziomej użyj dźwigni blokującej N. Sprawdź, czy dźwignia blokująca N jest dobrze dokręcona.



Jeżeli Użytkownik ma tendencję do krzyżowania stóp i nóg (ułożenie przywodzące lub nożycowe), należy zastosować rozdzielnice nóg 814, aby uniknąć tej patologicznej pozycji (akcesoria Rys. 12).


Po zakończeniu tych operacji można używać DYNAMICO.

Przed wszystkim ważne jest, aby znać pomoc i wiedzieć, jak z niej korzystać.


Dzieci zazwyczaj nie boją się korzystać z tej pomocy. Wręcz przeciwnie, często są niezwykle zadowoleni i szczęśliwi i chcą się rozwijać we wszystkich kierunkach.

Nie należy zabraniać tym „rozbrykanym” dzieciom tego robić. Wręcz przeciwnie, należy je do tego zachęcać. W pierwszych dniach warto pozwolić dziecku swobodnie korzystać z DYNAMICO, aby...

możesz wypróbować różne sposoby jego wykorzystania.

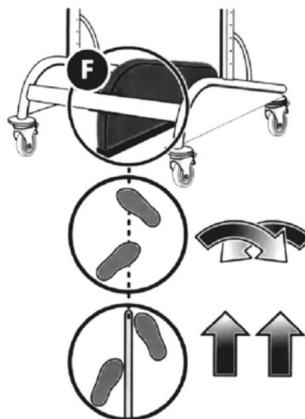

Rys. 12

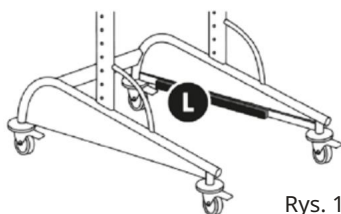

Rys. 13

Jeżeli Użytkownik porusza się zbyt szybko, lepiej jest użyć sztangi obciążeniowej L (akcesoria Rys. 13).

W razie konieczności należy użyć hamulców regulowanych H (akcesoria rys. 14). Użyj pokrętki, aby wyregulować hamulce i upewnić się, że efekt hamowania jest taki sam na obu kołach.

Na początku zawsze najlepiej jest użyć blokady kierunku kół G (akcesoria Rys. 15), aby uniknąć poślizgów i uderzeń.



Rys. 14



Rys. 15

Aby zamocować mechanizm blokujący, należy ustawić tylne koła tak, jak pokazano na rysunku i obrócić je. dźwignię zatrzymującą V tak, aby można ją było zamocować w specjalnym gnieździe znajdującym się nad nią.

W przypadku dzieci „łękliwych”, które boją się korzystać z DYNAMICO (prawdopodobnie z powodu problemów z percepcją, które utrudniają świadomość przestrzeni i odległości), najlepiej rozpocząć korzystanie z niego w inny sposób. W pierwszych krokach Użytkownik nie powinien pozostawiony sam sobie, ale musi mu towarzyszyć wykwalifikowany personel, terapeuta lub rodzic, który będzie stał albo z przodu, albo z boku i będzie przesuwaj DYNAMICO powoli i delikatnie (rys. 16).

Daje to Użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa, szczególnie jeśli terapeuta lub rodzic mówi do niego w tym samym czasie i wyjaśnia, co robią (na przykład: „teraz idziemy w kierunku stołu, docieramy do telewizora, zamierzamy odbić piłkę od stołu, wracamy...”)

Pierwsze kroki zawsze robimy do przodu, potem do tyłu i na końcu na boki.

Na początku kroki będą stawiane standardowym krokiem, następnie konieczna będzie zmiana kroku, tak aby kroki były szybsze lub wolniejsze.

Sugerujemy podążanie dobrze zdefiniowaną ścieżką specjalnie zaprojektowaną, aby pomóc w orientacji zarówno „pochopnej”, jak i „przestraszanej” Użytkownicy.



Rys. 16




W przypadku dzieci, które mają trudności z chodzeniem, lepiej jest przesunąć podparcie miednicy z tyłu, aby uzyskać zgięcie tułowia. W ten sposób łatwiej będzie poruszać kończynami dolnymi.

MONTAŻ KOMPONENTÓW

Montaż podpórek ramion

809

Dostępne są do zastosowań WEWNĘTRZNYCH I
OUTDOOR DYNAMICO

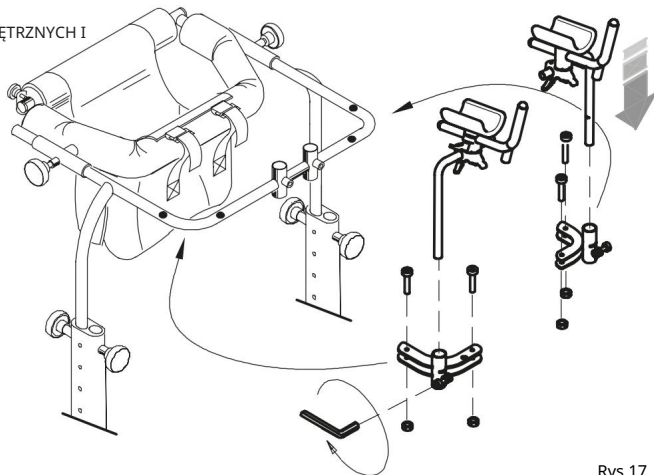

Rys.17


Montaż pasków naramiennych

943

Dostępne są do zastosowań WEWNĘTRZNYCH I
OUTDOOR DYNAMICO

Z wyjątkiem środka 1

Ten dodatek można montować tylko na
podpórki pod ramiona

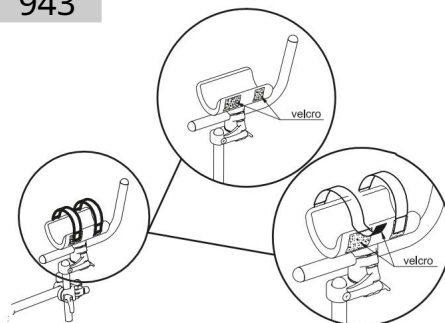

Montaż sztang do podnoszenia ciężarów


810

Dostępne są w wersji DYNAMICO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO I
ZEWNĘTRZNEGO

Za wyjątkiem punktu 1

przymocuj drążki obciążające L za pomocą śrub, postępując
zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku.

Przykręć śruby za pomocą naszego klucza imbusowego.

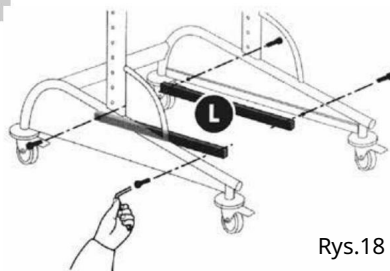


Rys.18



Montaż HAMULCÓW KÓŁ PRZEDNICH 811

Są one dostępne dla INDOOR DYNAMICO.

Zamontuj część G, używając naszych śrub Q i nakrętek samohamownych D, dzięki naszym kluczom.

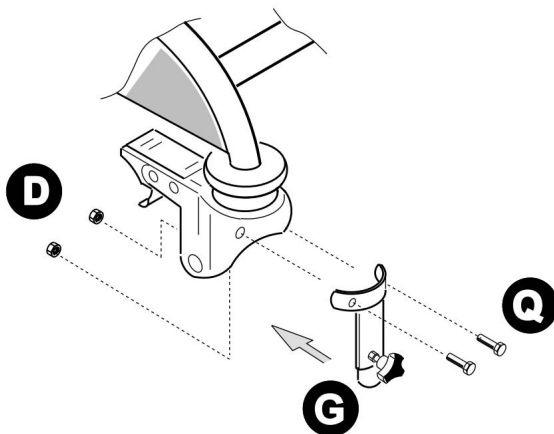

Montaż KOŁA BEZPOŚREDNIO. ZAMKI

812

Dostępne są w wersji INDOOR DYNAMICO.

Zdemontuj tylne koła odkręcając gwintowane sworznie Y za pomocą naszego klucza.

Zdemontuj podporę koła za pomocą śruby V.


Zamocuj pierścień R w sworzniu i ustaw go tak, aby otwór był dobrze wyrównany do przodu.

Dokręć śrubę, aby mocno zablokować pierścień R.

Złóż urządzenie G, używając naszych śrub Q i nakrętek samokontrujących D.

Teraz zamontuj podporę koła na pomocy, używając śruby V, którą musisz mocno dokręcić.

Złóż koło wkładając sworznię gwintowaną Y, który zostanie zablokowany nakrętką.

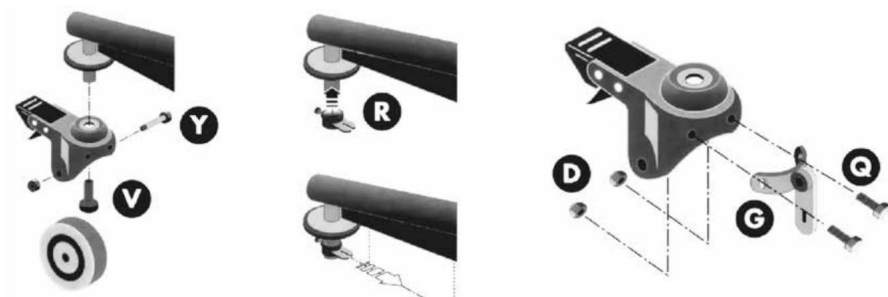



Montaż regulowanej kierownicy 813

Dostępny w wersjach INDOOR i OUTDOOR DYNAMICO

Zamocuj dolne drążki kierownicy E w uchwycie i po ustaleniu przybliżonej wysokości zablokuj pokrętła (M) i upewnij się, że dźwignia blokady (N) do regulacji poziomej jest dobrze zamocowana.



Rys. 21


Montaż DZIELNICY NÓG

814

Dostępny dla INDOOR DYNAMICO

Złóż akcesorium F tak, jak pokazano na rysunku.
Zdjęcie. Przykręć dwie śruby do górnej części
i dwie śruby w dolnej części.

Dokręć za pomocą naszego klucza imbusowego.

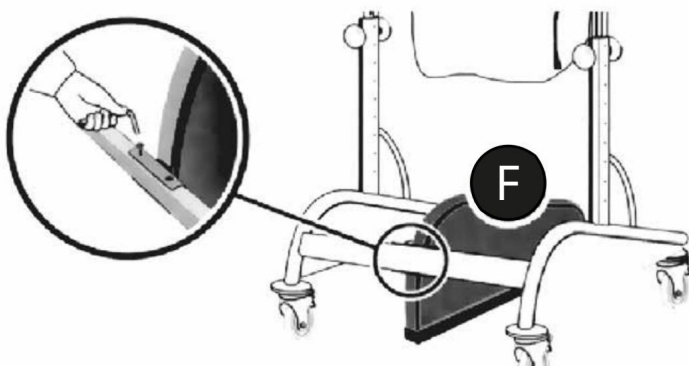

Rys. 22




Montaż siodła

815

☒ Dostępny dla INDOOR DYNAMICO

Tylko dla rozmiarów 2, 3 i 4

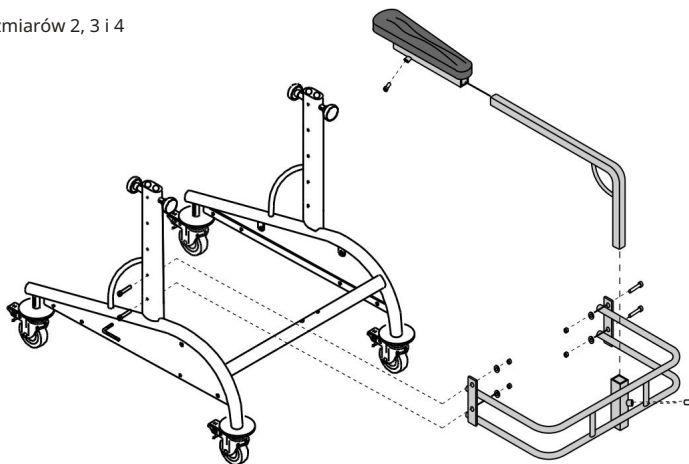


Rys.23

Montaż TACKI PRZEŹROCZYTEJ

824



tacka jest przeznaczona wyłącznie do UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO pomocy

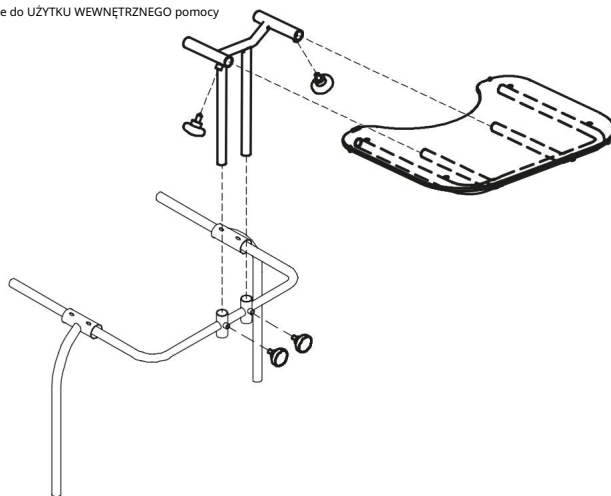

Rys.24



NIEKTÓRE SUGESTIE TERAPEUTYCZNE

Jak już wcześniej widzieliśmy, DYNAMICO może być skutecznym narzędziem do ćwiczenia pewnych wzorców chodzenia.

W tej sekcji zaprezentujemy kilka przykładów możliwych ćwiczeń rehabilitacyjnych, które można wykonywać na siłowni lub w domu.



OSTRZEŻENIE!

Ćwiczenia te muszą być wykonywane pod ścisłą kontrolą rodzica lub upoważniony, wyspecjalizowany personel.

Usuń wszystkie obiekty, które mogą stanowić przeszkodę.

W razie konieczności należy użyć układu hamulcowego na przednich kołach, aby zmniejszyć prędkość DYNAMICZNY

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek ćwiczeń upewnij się, że nie ma w pobliżu żadnych niebezpiecznych przedmiotów ani ostrych przedmiotów. krawędzie w zakresie DYNAMICO.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone rzeczom, osobom lub zwierzętom, wynikające z nieprzestrzegania zasad opisanych w niniejszym podręczniku.

Chodzenie dzięki wsparciu ręki terapeuty lub rodzica

Ćwiczenie to ma na celu pomóc w rozpoczęciu pierwszych kroków poprzez wykorzystanie informacji dotykowych jako punktu odniesienia.

Dziecko musi podążać za ruchem wywołane przez terapeutę lub rodzica.




Rys. 25

Trasa kręgli i linii poziomych

Celem tego kursu jest integracja przekazu wizualnego i informacji percepcyjne poprzez ruch i pieszy.


Dziecko musi organizować ruch i kierunek sterowania.

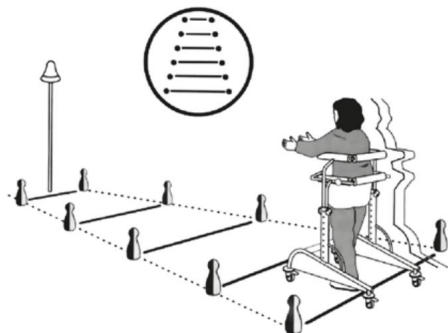



Trasa kręgł i poziomych linii z czerwonym, stałym celem do osiągnięcia (rys. 27-28)

Ćwiczenie to ma na celu zaprogramowanie chodzenia w celu osiągnięcia celu poprzez konstrukcję wizualną i motoryczną.

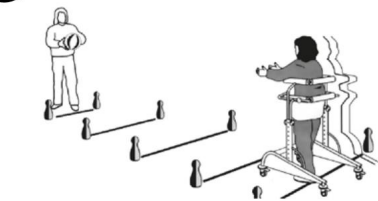

Rys. 27

Dziecko musi chodzić i brać przedmiot umieszczone na końcu kursu.




Rys. 28

Seria kręgł i poziomych linii z ruchomym celem do osiągnięcia.

Celem kursu jest skoordynowanie ruchów dziecka z ruchami przedmiotów, do których chce ono dotrzeć, w celu ułatwienia organizacji przestrzeni.

Dziecko musi dosięgnąć przedmiotu, który jest podchodząc do niego i biorąc ją.

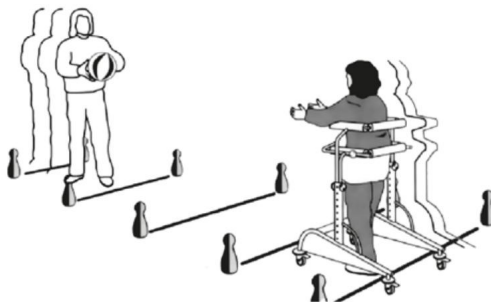


Rys. 29

Seria kręgł i poziomych linii z ruchomym celem, który zbliża się i oddala.

Celem kursu jest ukształtowanie percepcji odległości, niezbędnej do samodzielnego chodzenia.

Dziecko musi spróbować dosięgnąć przedmiotu który zbliża się i odchodzi i odwrotnie.

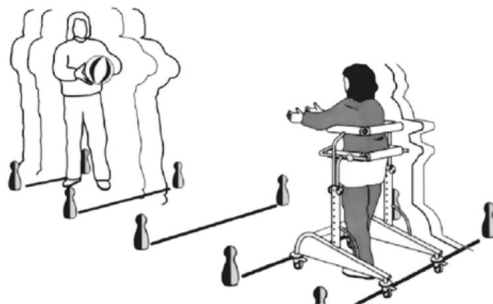


Rys. 30

Słałom z tyczkami i dzwonekami

Celem tego kursu jest integracja informacji wizualnej i ruchu poprzez poruszanie się do przodu i bokiem.

Dziecko musi przejść między słupkami

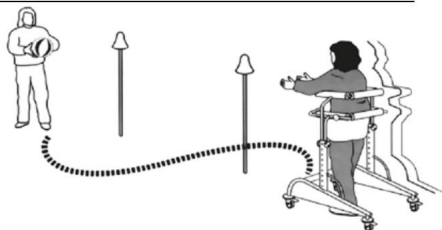

Rys. 31




aby osiągnąć cel.

Ścieżka z nagłym STOPEM

Ta ścieżka ma na celu wykształcenie umiejętności zatrzymania kroku, czyli zatrzymania się wtedy, gdy dziecko tego chce.

- ☒ Dziecko musi zatrzymać się w precyzyjnym punkcie ścieżki. Punkt „STOP” musi być zmieniane za każdym razem.

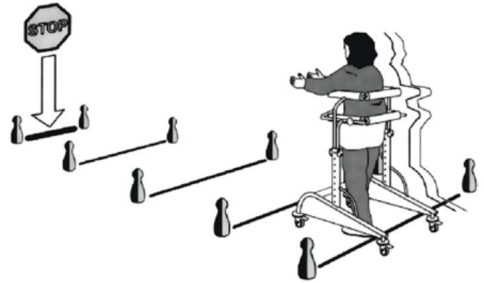


Rys. 32

Ściganie

- ☒ Kurs z powolną zmianą kierunku;
- ☒ Trasa z szybką zmianą kierunku;

Ścieżka ta ma na celu usprawnienie zmian kierunku na boki oraz integrację widzenia i chodzenia.

- ☒ Dziecko musi stosować się do zaleceń terapeuty lub wolne lub szybkie ruchy rodziców.

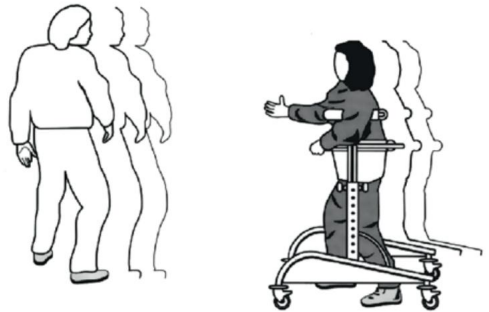

Rys. 33

Wolne chodzenie

Ćwiczenie to ma na celu zorganizowanie ruchu na dużej przestrzeni bez pomocy osoby oznaczonej. kurs.

- ☒ Dziecko musi dotrzeć do oferowanego przedmiotu mu przez terapeutę lub rodzica.



Rys. 34

KONSERWACJA

Wykonywanie wszelkich czynności konserwacyjnych jest konieczne w celu utrzymania prawidłowej funkcjonalności i bezpieczeństwa urządzenia.

Tylko jeżeli czynności te zostaną przeprowadzone w czasie i w sposób opisany powyżej, odpowiedzialność za zachowanie zasadniczych wymagań urządzenia spoczywa na producencie.

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa lub uszkodzenia produktu należy zaprzestać jego używania i skontaktować się z firmą ORMESA.

1. KONSERWACJA ZWYKŁA (miesięczna)

1.1 sprawdź gładkość CZĘŚCI RUCHOMYCH i utrzymuj je w czystości, usuwając kurz i brud, aby uniknąć tarcia, które mogłoby zakłócić prawidłowe działanie:

- regulacja wysokości i przednio-tylnej regulacji podparcia miednicy
- regulacja wysokości podparcia klatki piersiowej

1.1 KONSERWACJA KÓŁ

Czyść koła przynajmniej raz w miesiącu, usuwając z nich zanieczyszczenia (nici, włosy itp.), które mogą do nich przywierać.



Jeśli stwierdzisz NIESPRAWNOŚĆ HAMULCÓW, nawet częściową, skontaktuj się natychmiast ze sprzedawcą, który sprzedał Ci produkt. Oceni on ewentualną naprawę/wymianę, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, które mogłyby doprowadzić do wypadku.



NIE WOLNO wykonywać prac konserwacyjnych ani wymieniać części lub podzespołów, gdy użytkownik znajduje się w urządzeniu.



W środowisku morskim należy przeprowadzać wzmożone kontrole, czyścić częściej, smarować części narażone na korozję solną (takie jak chrom, śruby i wkręty).

1.2 SMAROWANIE

Pomoc nie wymaga szczególnego smarowania, z wyjątkiem przypadków, gdy kółka i sprężynowe mechanizmy blokujące podpórki miednicy i klatki piersiowej utraciły niezbędną płynność działania.

W takich przypadkach należy użyć komercyjnego smaru w sprayu, zwracając uwagę na ostrzeżenia podane na opakowaniu. PO NASMAROWANIU REGULOWANYCH CZĘŚCI, NALEŻY JE DOKŁADNIE OSUSZYĆ MIĘKKĄ ŚCIERECZKĄ.

2. KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA (dwuletnia)

ORMESA srl zaleca przeprowadzenie PEŁNEGO PRZEGLĄDU urządzenia w celu weryfikacji jego zgodności ze specyficznym zastosowaniem i utrzymania początkowych parametrów przez cały okres jego użytkowania.

Interwencja musi zostać przeprowadzona przez CENTRUM SERWISOWE SPECJALIZUJĄCE SIĘ w konserwacji pomocy mechanicznych dla osób niepełnosprawnych i obejmuje:

- 1) Ogólna weryfikacja produktu, integralności komponentów i blokowanie części mechanicznych, płynność ruchu części ruchomych
- 2) Weryfikacja wydajności
- 3) Możliwe interwencje mające na celu przywrócenie prawidłowej funkcjonalności
- 4) Kontrola mechaniczna (w przypadku napraw mechanicznych)
- 5) Dezynfekcja

PRODUCENT lub PODMIOT UPOWAŻNIONY musi udostępnić RAPORT, który

dostarcza dowody WYKONANYCH interwencji (WERYFIKACJE, NAPRAWY, KONTROLE, DEZYNFEKCJA)

3. NADZWYCZAJNA KONSERWACJA LUB NAPRAWA

KONSERWACJA NADZWYCZAJNA to wszelkie czynności wykonywane na urządzeniu poza standardowymi lub konserwacja zapobiegawcza (wspomniana powyżej).

Nadzwyczajne prace konserwacyjne musi wykonywać PRODUCENT, DYSTRYBUTOR lub TWÓJ ZAUFANY SKLEP ORTOPEDYCZNY

Interwencje należy wykonywać przy użyciu ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH producenta

Modyfikacje produktu NIE SĄ DOZWOLONE, z wyjątkiem możliwych konfiguracji podanych w broszurze

W ramach każdej pracy konserwacyjnej należy wykonać następujące czynności:

- 1) Ogólna weryfikacja produktu, integralności komponentów i blokowanie części mechanicznych, płynność ruchu części ruchomych
- 2) Weryfikacja wydajności
- 3) Kontrola mechaniczna (w przypadku napraw mechanicznych)
- 4) Dezynfekcja

PRODUCENT lub PODMIOT UPOWAŻNIONY musi udostępnić RAPORT, który będzie zawierał dowody WYKONANYCH interwencji (WERYFIKACJE, NAPRAWY, KONTROLA, DEZYNFEKCJA)

INFORMACJA

SANIFIKACJA to kompleks procedur i operacji czyszczenia i/lub dezynfekcji

CZYSZCZENIE jest procesem fizycznym i mechanicznym (tj. pocieraniem), w którym bierze udział duża część potencjalnie chorobotwórczych mikroorganizmów (bakterii, grzybów lub wirusów), a także widocznych zabrudzeń, usunięte z powierzchni.

Połączenie działania mechanicznego z innymi czynnikami, takimi jak stosowanie detergentów (środków chemicznych) (działanie), temperatura i czas trwania mogą skutecznie i wystarczająco zmniejszyć obciążenie mikrobiologiczne urządzenie.

DEZYNFEKCJA, po oczyszczeniu i umyciu, dodatkowo redukuje liczbę mikroorganizmów na powierzchni i eliminuje mikroorganizmy chorobotwórcze, czyli bakterie wywołujące choroby i wirusy.

Produkty, których etykieta zawiera numer autoryzacji/rejestracji Ministerstwa Zdrowia lub innego właściwego organu państwa członkowskiego UE, są „środkami dezynfekującymi”. Każda czynność dezynfekcyjna musi być zawsze poprzedzona czyszczeniem i oczyszczaniem, ponieważ brud zmniejsza aktywność środka dezynfekującego. SUSZENIE jest niezbędne, ponieważ w resztkowej warstwie wody może rozwijać się rozwój mikroorganizmów.

Na rynku dostępne są środki chemiczne o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym do sprzętu szpitalnego.

Produkty te są skuteczne w niskich temperaturach, umożliwiając czyszczenie (usuwanie zanieczyszczeń) i dezynfekcję (usuwanie mikroorganizmów chorobotwórczych, czyli bakterii wywołujących choroby) w jednym zabiegu.

Zdejmowane TAPICERKI można prać, przestrzegając symboli zamieszczonych na etykiecie.

Pranie to wyjątkowy środek sanitarny. Wymień je, gdy się zużyją lub będą trudne do zdezynfekowania.

OSTRZEŻENIA

Należy zapoznać się z KARTĄ TECHNICZNĄ środka chemicznego, aby upewnić się, że nadaje się on do stosowania na powierzchniach chromowanych/lakierowanych oraz na elementach z tworzyw sztucznych z PVC, PA, PP. Należy również przeprowadzić test na małej powierzchni, aby upewnić się, że nie uszkodzi on środka.

Aby działanie było skuteczne, należy PRZESTRZEGAĆ DAWKOWANIA I CZASU DZIAŁANIA podanych na ETYKIECIE produktu.

Stosuj środki ochrony indywidualnej (rękawice, maskę FFP, przyłbicę itp.) zgodnie z etykietą produktu.



Czynności dezynfekcji należy wykonywać bez obecności użytkownika w pomieszczeniu.

Nie należy używać sprężonego powietrza, które może powodować powstawanie aerozolu i skażenie wirusami i bakteriami w otoczeniu oraz na własnej osobie.



W czasie epidemii COVID-19 zakażone środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, fartuchy, okulary, maski, czepki itp.) należy wyrzucić do ogólnego kosza na śmieci, chyba że w przeciwnym razie wskazania przez gminę będącą jej właścicielem

PROCEDURA

Działania	Rytm	Opis
4.1 CZYSZCZENIE I OCZYSZCZANIE	codziennie lub co tydzień na podstawie intensywności użytkowania i ryzyka biologicznego (pacjent ze szczególnym poceniem się, ślinieniem; pandemia lub stan zagrożenia endemicznego, np. Covid-19) Przed dezynfekcją	Nasącz gąbkę lub czystą jednorazową ściereczkę neutralnym detergentem rozcieńczonym wcześniej w wodzie. Wyczyść tapicerkę, ramę, akcesoria i na końcu koła. Usuń wszelkie pozostałości produktu przecierając je czystą, wilgotną gąbką lub szmatką. Wytrzeć do sucha czystą, miękką ściereczką. Kontynuuj dezynfekcję
4.2 DEZYNFEKCJA	Przed ponownym użyciem produktu przez nowego użytkownika	Spryskaj czystą, jednorazową ściereczkę środkiem chemicznym o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym przeznaczonym do sprzętu szpitalnego. Przetrzyj tapicerkę, ramę i czyste akcesoria (4.2) aż do całkowitego odparowania.

<p>4.3 PRANIE</p>	<p>Besed w użyciu</p>	<p>Można prać UPRZĄŻ i ZDEJMOWANĄ TAPICERKĘ, przestrzegając następujących wskazówek: Prać w pralce z użyciem neutralnego detergentu. Maksymalna temperatura: 40°.</p> <div data-bbox="557 188 620 236"> </div> <div data-bbox="664 236 762 255"> <p>Delikatny cykl</p> </div> <div data-bbox="557 252 620 300"> </div> <div data-bbox="664 269 754 288"> <p>Nie wybielać</p> </div> <div data-bbox="557 296 620 344"> </div> <div data-bbox="664 323 762 343"> <p>Nie prasować</p> </div> <div data-bbox="557 357 605 405"> </div> <div data-bbox="664 384 832 403"> <p>Nie suszyć w suszarce bębnowej</p> </div> <p>W celu uzyskania DZIAŁANIA DEZYNFEKUJĄCEGO O CHARAKTERZE ANTYWIRUSOWYM do normalnego cyklu prania można dodać SPECJALNY ŚRODEK CHEMICZNY; pranie w wysokiej temperaturze (60°C) jest możliwe, lecz tylko sporadycznie, ponieważ tapicerka może się zużywać.</p> <p>OSTRZEŻENIE!</p> <p>Zapięcia na rzepy mogą uszkodzić bęben pralki, jeśli jest ona wyposażona w szybki cykl wirowania. Używaj krótkiego (delikatnego) cyklu prania, zgodnie z tabelą.</p>
<p>4.4 SANITYZACJA NADWĘGLANEM</p>	<p>Na podstawie użycia</p>	<p>Nadwęglan jest naturalnym produktem pochodzenia mineralnego, dostępnym w handlu; po rozpuszczeniu w wodzie już w temperaturze 30°C uwalnia aktywny tlen, który ma działanie dezynfekujące, antybiotyczne i antybakteryjne.</p> <p>W celu zapewnienia działania dezynfekującego podczas czyszczenia ramy, prania uprząży i zdejmowanych tapicerek, do płynu można dodać 1 łyżeczkę nadwęglanu > 30%.</p> <p>detergent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - W pralce: dodać 1 łyżeczkę nadwęglan w bębnie wraz z detergent. - Ręcznie/ do czyszczenia ramy: rozpuścić 1 łyżeczka nadwęglanu w misce razem z detergentem postępuj zgodnie z mycie i oczyszczanie.

POMOC I CZĘŚCI ZAMIENNE DYNAMICO

Jeśli potrzebujesz pomocy lub części zamiennych, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego kupiłeś produkt.

UTYLIZACJA

Jeżeli urządzenie musi zostać zełomowane, należy zutylizować jego części zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju.

WARUNKI TRWAŁOŚCI, PONOWNEGO UŻYCIA I PONOWNEGO PRZYDZIELENIA NOWY UŻYTKOWNIK

Zakładając, że produkty Ormesa powinny być wybierane, oceniane i zamawiane pod kątem potrzeb indywidualnego użytkownika, ponowne wykorzystanie jest jednak możliwe pod warunkiem przestrzegania następujących warunków.

Bazując na doświadczeniu innych podobnych sprzedawanych modeli, postępie technologicznym, gwarancjach Systemu Zarządzania Jakością certyfikowanego w 1998 r. zgodnie z normą ISO 9001, istnieje wystarczająca pewność, że średnia żywotność DYNAMICO wynosi około 5 lat, pod warunkiem, że jest używany zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi.

Tylko w przypadku spełnienia warunków przechowywania i transportu określonych w rozdziale SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I „TRANSPORTUJ WYROB MEDYCZNY”, okresy przechowywania wyrobu u sprzedawcy nie powinny być wliczane do tego okresu.

Czynniki niezależne od produktu, takie jak rozwój użytkownika, jego choroby, użytkowanie i otaczające środowisko, mogą znacząco skrócić okres trwałości produktu; z drugiej strony, jeśli wskazania dotyczące użytkowania i konserwacji będą prawidłowo przestrzegane, niezawodność produktu może znacznie przekroczyć podaną powyżej średnią żywotność.

Przed poddaniem recyklingowi lub ponownym przeznaczeniem już używanego produktu Ormesa wymagane jest, aby:

1. lekarz lub terapeuta sprawdza, czy pomoc jest odpowiednia i wystarczająca spełniać potrzeby wymiarowe, funkcjonalne i posturalne nowego użytkownika, i czy wszystkie jego elementy są dla niego odpowiednie. Powinności należy również wziąć pod uwagę oznakowanie i odpowiedzialność producenta wymagania bezpieczeństwa dla produktu pozostają aktualne tylko w przypadku, gdy oryginalny produkt produkt nie uległ zmianie i zastosowano wyłącznie oryginalne akcesoria lub części zamienne
2. wykwalifikowany personel techniczny firmy specjalizującej się w konserwacji pomocy technicznych dla osób niepełnosprawnych wykonuje szczegółową badanie techniczne w celu sprawdzenia jego stanu i zużycia, braku jakichkolwiek uszkodzenia i awarie wszystkich podzespołów/regulacji, obecność instrukcji obsługi, etykiety z datą i numerem seryjnym. Kopia instrukcję obsługi i konserwacji można zawsze uzyskać od sprzedawcy, który dostarczył produkt lub bezpośrednio do Ormesa
3. Produkt został dokładnie wyczyszczony i zdezynfekowany zgodnie z wskazówki podane w rozdziale „KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I Rozdział „DEZYNFEKCJA”

Zalecamy sporządzenie pisemnej dokumentacji wszystkich kontroli przeprowadzonych na produkcie przed przekazaniem go nowemu użytkownikowi.



W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa lub uszkodzeń należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu i skontaktować się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub producentem.



Ormesa srl Via delle Industrie, 6/8 - ZI Sant'Eraclio - 06034 FOLIGNO (PG) WŁOCHY PI
IT 00574020541 CCIAA Perugia 119215 Iscr. Plemię. Perugia 11907
Tel. + 39 0742 22927 Faks +39 0742 22637 info@ormesa.com

www.ormesa.com



Autoryzowany dealer

Dane techniczne i informacje zawarte w niniejszym podręczniku nie są wiążące. ORMESA zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich niezbędnych zmian bez wcześniejszego powiadomienia lub wymiany.
