INFORMACJE DOT. UŻYTKOWANIA ……. (pl)
=> wyrób medyczny: wózek-rehabilitacyjny

CORZINO

(wersja Basic / rozmiary: 30, 34, 38, 42)




Produkcja i Dystrybucja:

PATRON Bohemia a.s.
Českolipská 3419, 27601 Mělník, Czechy
tel.: +420-315 630 111
http:// www.patron.eu

CE MD

SCHEMAT

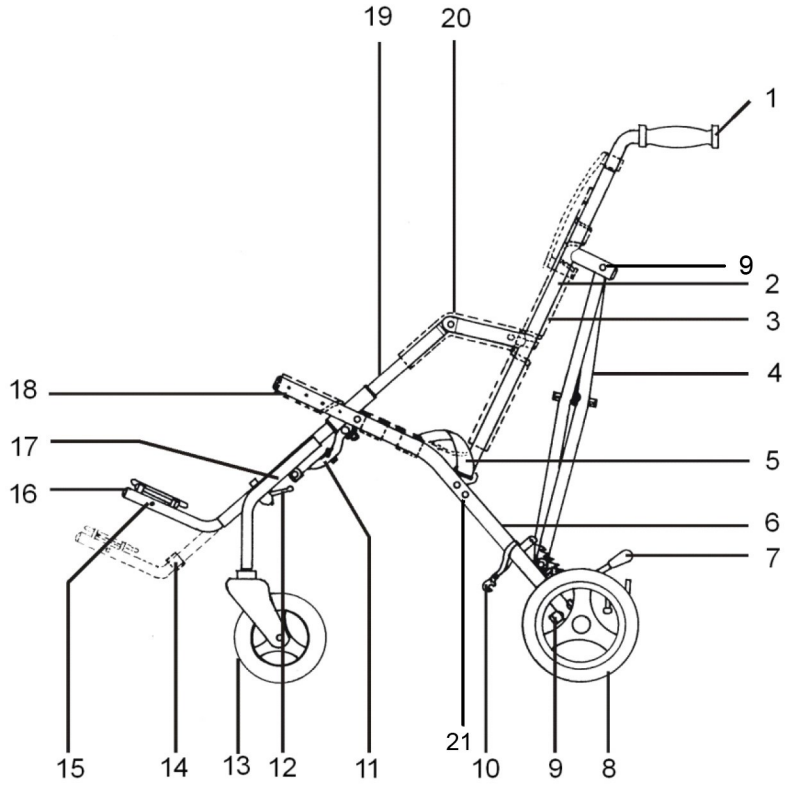

Specyfikacja techniczna:	CNB30	CNB34	CNB38	CNB42
Wysokość oparcia (mm)	550	650	650 (820)	660 (830)
Głębokość siedziska (mm)	280	330	380	380
Szerokość siedziska (mm)	300	340	380	420
Odległość od siedziska do podnóżka (mm)	290-420	300-440	300-440	330-490
Nachylenie oparcia	91°/ 93°	91°/ 94°	90°/ 93°	90°/ 93°
Nachylenie siedziska	22° / 21°	23° / 22°	22° / 21°	23° / 22°
Całkowita długość (mm)	980	980	1050	1050
Całkowita szerokość (mm)	530	590	620	650
Całkowita wysokość / z uchwytem do pchania (mm)	970/970	1040/1040	1230/950	1270/980
Masa (kg)	12,5	12,6	14,5	15,5
Maksymalne obciążenie (kg)	45,0	55,0	75,0	75,0
Długość złożonego wózka (mm)	1160	1180	1200	1200
Szerokość złożonego wózka (mm)	340	340	370	400
Wysokość złożonego wózka (mm)	350	370	360	360

OPIS SCHEMATU

1. uchwyt do pchania
2. rurka oparcia
3. oparcie
4. tylny krzyżak
5. pas bezpieczeństwa
6. rurka siedziska – tył
7. dźwignia hamulca
8. tylne koło
9. wspornik tylny
10. zaczep do przechowywania
11. przedni krzyżak
12. dźwignia zabezpieczająca
13. przednie koło
14. oparcie dla łydek
15. rurka przedłużająca podnóżek
16. podnóżek
17. przycisk sprężynowy
18. siedzisko
19. rurka przednia
20. tapicerka podłokietnika
21. regulacja kata nachylenia oparcia


Obr.1



Obr. 2



Obr. 3

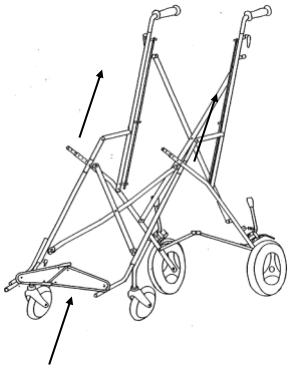

Obr. 4



Obr. 5



pl

(Informacje dot. użytkowania - data ostatniej aktualizacji: 02.05.2023)

WPROWADZENIE:

Szanowni Państwo, prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem wyrobu. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wyrobu i jego prawidłowego użycia, należy skontaktować się z profesjonalnym personelem lub centrum serwisowym. Wszelkie poważne zdarzenia niepożądane związane z wyrobem lub pogorszenie stanu zdrowia użytkownika w związku z użytkowaniem wyrobu należy niezwłocznie zgłaszać oficjalnemu dystrybutorowi wyrobu w Państwa kraju lub producentowi wyrobu. Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i/lub usunięcia tego produktu, a także deklarację zgodności produktu, proszę skontaktować się z oficjalnym dystrybutorem wyrobu w swoim kraju lub producentem. Należy zachować niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

..... OSTRZEŻENIE, UWAGA:

① **UWAGA! Każdy ciężar zamocowany do uchwytu do pochania (torba, …) wpływa na stabilność wózka!**

② **Nigdy nie zostawiać dziecka bez opieki!**

③ **Zalecane ciśnienie powietrza w oponach: 180 kPa**



…….maksymalne obciążenie.

OSTRZEŻENIE! Podczas używania wózka należy trzymać palce z dala od ruchomych części.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki! Nawet jeśli pasy i hamulce są w użyciu.

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie mechanizmy blokujące są prawidłowo zablokowane i czy wszystkie elementy zabezpieczające są prawidłowo użyte.

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem należy sprawdzić, czy fotelik jest prawidłowo przymocowany do płyty mocującej na ramie.

OSTRZEŻENIE! Fotelik nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.

OSTRZEŻENIE! Tego wyrobu nie wolno używać podczas joggingu lub jazdy na rolkach.

OSTRZEŻENIE! Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem wózka, a także zachować ją na przyszłość. Bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone, jeśli nie będą Państwo przestrzegać wskazówek i uwag dotyczących bezpieczeństwa wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi.

WYRÓB - OPIS, CECHY, IDENTYFIKACJA:

Otrzymali Państwo wyrób, który jest przeznaczony do wszechstronnego codziennego użytku na zewnątrz, jak i wewnątrz domu. Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z jego obsługą, sposobem obchodzenia się z nim i działaniem wszystkich funkcji, aby uniknąć możliwości odniesienia obrażeń. W szczególności prosimy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Wszyscy użytkownicy i/lub osoby im towarzyszące muszą zostać przeszkoleni przez wykwalifikowany personel w zakresie obsługi wyrobu. Użytkownicy i / lub osoby im towarzyszące są zobowiązani do zapoznania się w szczególności z ryzykiem szczątkowym związanym z tym produktem, w związku z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa podanymi w niniejszej instrukcji.
- Wyrób został dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowe zmiany mogą być wprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Zalecamy indywidualne dostosowywanie wyrobu raz w roku, aby zapewnić optymalną konfigurację wyrobu dla użytkownika. Szczególnie w przypadku użytkowników ze zmieniającą się anatomią (np. wymiary ciała i waga) zaleca się dostosowanie co najmniej raz na sześć miesięcy.
- Państwa konkretny wyrób może różnić się od przedstawionych tutaj wariantów. W szczególności nie wszystkie opcjonalne akcesoria opisane w niniejszej instrukcji są zamontowane w Państwa wyrobie.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w konstrukcji opisanej w niniejszej instrukcji.

Cechy wyrobu:
Ten wyrób jest sklasyfikowany jako nieinwazyjny wyrób medyczny klasy 1. Wyrób jest przeznaczony do użytku krótko- i długoterminowego. Wyrób jest kontrolowany przez osobę towarzyszącą i służy do transportu dzieci z pomocą drugiej osoby. Wyrób jest przeznaczony do stosowania na twardej powierzchni wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Wyrób jest przeznaczony dla dzieci z tymczasowym lub trwałym ograniczeniem zdolności chodzenia, niezdolnych do chodzenia lub utrzymywania pozycji stojącej. Wyrób jest odpowiedni dla użytkowników, których anatomia (np. wymiary ciała i waga) pozwala na używanie wyrobu w określonym celu i których skóra jest nienaruszona. Produkt może być używany wyłącznie w połączeniu z akcesoriami określonymi w formularzu zamówienia.
Producent tego wyrobu nie ponosi odpowiedzialności za kombinacje z wyrobami medycznymi i/lub akcesoriami innych producentów. Dozwolone są wyłącznie kombinacje produktów ocenione pod względem skuteczności i bezpieczeństwa. Takie połączenie wyrobu i akcesoriów musi być dozwolone i określone w umowie dotyczącej połączenia produktów.
Wskazania: od łagodnych do poważnych aż po całkowite ograniczenia ruchów użytkownika.
Przeciwwskazania: Przeciwwskazania bezwzględne nie są znane. Względne przeciwwskazania - brak fizycznych lub psychicznych warunków wstępnych, znaczne uszkodzenie tkanki powierzchniowej (np. skóry itp.).
Zjawiska towarzyszące: W wyjątkowych przypadkach podczas korzystania z wyrobu mogą wystąpić następujące zjawiska towarzyszące - ból mięśni szyi, ból mięśni i stawów, zaburzenia krążenia, ryzyko odleżyn. W przypadku wystąpienia tych zjawisk towarzyszących lub problemów, proszę skontaktować się z lekarzem lub terapeutą.

Identyfikacja wyrobu:
Informacje na etykiecie produktu:

GTIN	Globalny handlowy numer identyfikacyjny. Zgodnie ze standardem GS1 = UDI-DI - Unikalny Identyfikator Wyrobu - Identyfikator Wyrobu.
SN	Numer seryjny. Zgodnie ze standardem GS1 = UDI-PI - Unikalny Identyfikator Wyrobu - Identyfikator Produkcji.
REF	Identyfikacja producenta - wersja produktu
Mod.:	Wersja produktu / tekst
Spec.:	Wersja produktu / wersja kolorystyczna
	Producent - adres

Data produkcji: Numer seryjny (pierwsze 3 cyfry) zawiera datę produkcji. ("253" = 253 miesiące od 01.01.2000 = styczeń 2021)

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA:

- Osoba obsługująca musi być zaznajomiona z niniejszą instrukcją.
- Przed użyciem należy zasięgnąć profesjonalnej porady medycznej dotyczącej przydatności tego wyrobu.
- Przed odjazdem należy zawsze upewnić się, że dziecku jest wygodnie, a ubrania, kocyki itp. są schowane, aby nie wpadły pod koła.
- Wózek NIE MOŻE być używany jako fotelik dla dziecka podczas podróży pojazdem silnikowym lub autobusem, jeśli pojazd nie jest do tego przystosowany i jeśli wózek nie jest modelem przetestowanym zderzeniowo zgodnie z wymogami normy ISO 7176-19 lub dodatkowo ANSI/RESNA WC-4:2012 Sekcja 19 Załącznik A.
- Przed przystąpieniem do regulacji wózka należy upewnić się, że dziecko znajduje się z dala od ruchomych części, aby uniknąć obrażeń.
- Podczas ustawiania nachylenia i regulacji siedziska oraz oparcia należy postępować ostrożnie, aby uniknąć nagłych niekontrolowanych ruchów.
- Nie pozwalać dziecku na samodzielne wsiadanie i wysiadanie z wózka.
- Podczas czynności wsiadania i wysiadania z wózka należy zawsze włączać hamulce postojowe.
- Wózek nie jest przeznaczony do jazdy po schodach.
- Proszę upewnić się, że akcesoria stabilizujące, barierka zabezpieczająca i inne elementy są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.
- Nie stawać na podnóżku.
- Hamulce muszą być aktywne przez cały czas, gdy wózek się nie porusza.
- Najpierw proszę poćwiczyć pokonywanie krawężników z pustym wózkiem.
- Osoba obsługująca wózek musi podjąć środki ostrożności przeciwko zagrożeniu pożarowemu. W budynkach należy sprawdzić lokalizację wyjść przeciwpożarowych i upewnić się, że procedury są zrozumiałe.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się wózkiem ani wieszać się na nim.
- Podczas jazdy należy zachować pełną ostrożność, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji lub kolizji.
- Nie przeciążać wózka. Przeciążenie podwozia, siedziska, torby lub kosza powoduje zmniejszenie stabilności wózka.
- Podczas manewrowania wózkiem należy zachować pełną ostrożność, aby nie zranić dziecka ani siebie.
- Jeśli to możliwe, należy zawsze korzystać z podjazdów lub wind, aby pokonać wszelkie ograniczenia utrudniające dostęp.
- Wózek należy zawsze podnosić we dwie osoby.
- Nigdy nie należy przenosić wózka, jeśli użytkownik i/lub pomocnik nie są pewni, czy mogą bezpiecznie przenieść wózek z dzieckiem.
- Podczas jazdy wózkiem po drogach należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
- Proszę nie używać wózka do celów innych niż te, do których został zaprojektowany.
- Wózek jest przeznaczony do przewożenia tylko jednego dziecka.
- Nie należy używać innych niż oryginalne akcesoria PATRON przeznaczone dla tego wyrobu.
- Podczas składania i rozkładania wózka należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi, aby uniknąć uszkodzeń konstrukcji, które mogłyby wpłynąć na stabilność wyrobu.
- W przypadku widocznej wady, która ogranicza bezpieczne użytkowanie wyrobu (np. uszkodzenie podwozia, odpadnięcie części lub inne wizualnie widoczne wady, pęknięcia itp.) należy natychmiast zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się z lokalnym oficjalnym dystrybutorem lub centrum serwisowym.
- Firma PATRON nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z innych niż oryginalne akcesoria PATRON dostarczone przez tę firmę.
- Firma PATRON nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego wyrobu.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA:

Rozkładanie wózka - Postawić wózek na kołach, odblokować zaczep do przechowywania, chwycić jedną rączkę i nacisnąć na przeciwległą rurę siedziska. Mocno nacisnąć na rury siedziska, aby upewnić się, że wózek jest całkowicie rozłożony. Za pomocą stopy zablokować tylne usztywnienie w pozycji prostej. Owinąć obicie podłokietnika wokół podłokietników. Zamontować podnóżek na wózku. Zablokować usztywnienie siedziska.
Podnóżek (elem. **16)**
Montaż - Położyć na podłodze prawie rozłożony wózek z zaciągniętymi hamulcami i zwolnić obie dźwignie bezpieczeństwa. Chwycić podnóżek, nacisnąć przycisk sprężynowy umieszczony w tylnej górnej części rurki, odblokować sworzeń blokujący i wsunąć obie rurki do obu mocowań podnóżka, aż zostaną zablokowane w najniższej pozycji za pomocą tylnego przycisku sprężynowego.
Regulacja długości - zwolnić obie dźwignie bezpieczeństwa, pociągnąć oba przyciski sprężynowe podnóżka i ustawić go w żądanej pozycji. Dokręcić obie śruby zabezpieczające, aby zablokować podnóżek w żądanej pozycji.
Demontaż - Położyć na podłodze prawie rozłożony wózek z zaciągniętymi hamulcami. Ustawić podnóżek w najniższej pozycji, nacisnąć tylne przyciski sprężynowe, odblokować trzpień blokujący i wyciągnąć podnóżki z obu rur bocznych jednocześnie.

Oparcie (regulacja nachylenia)
W celu regulacji należy poluzować tylne rozpórki wózka (elem. 9). Oparcie jest mocowane za pomocą śruby M8 w dolnej części do tylnych nóg (podstawowe ustawienie w górnej pozycji), możliwość zmiany pochylenia do drugiej pozycji jest możliwa poprzez przełożenie śrub z prawej i lewej strony wózka do dolnego otworu (elem. 21) w tylnej nodze. Zmieni się kąt nachylenia oparcia, patrz tabela.

Hamulce (elem. **7)**
zablokowane - nacisnąć dźwignię hamulca w dół, aby zablokować koło
odblokowane - pociągnąć dźwignię hamulca w górę, aby odblokować koło
Pięciopunktowy pas
Nałożenie 5 punktowego pasa na dziecko. Pas dla dziecka - usadowić dziecko w wózku, pasy naramienne założyć dziecku na ramiona, zapiąć środkową klamrą. Długość pasów regulujemy za pomocą zapięć drabinkowych i wysuwanych klamer z tyłu oparcia.
Wsiadanie do wózka - Upewnić się, że hamulec postojowy jest wciśnięty, aby ułatwić dostęp można zdjąć podnóżek; jeśli to możliwe oprzeć tył wózka o ścianę lub inny nieruchomy obiekt (inna możliwość to dodatkowa osoba trzymająca wózek nieruchomo); umieścić ostrożnie dziecko w wózku, zapiąć pas bezpieczeństwa i zamontować podnóżek. Dziecko musi zawsze czuć się komfortowo.
Wysiadanie z wózka - Upewnić się, że hamulec postojowy jest wciśnięty; jeśli to możliwe oprzeć tył wózka o ścianę lub inny nieruchomy obiekt (inna możliwość to dodatkowa osoba trzymająca wózek nieruchomo); odpiąć pas bezpieczeństwa i ostrożnie wyjąć dziecko z wózka.
Pokonywanie krawężników i niskich przeszkód:
W dół - Podjechać przednimi kołami do krawędzi krawężnika, mocno chwycić za uchwyt do pchania i przechylić wózek lekko do tyłu. Balansując na tylnych kołach, zjechać z krawężnika. Nigdy nie przechylać wózka do przodu na krawężniku
W górę - dojechać przednimi kołami do krawężnika. Trzymając mocno za uchwyt do pchania przechylić wózek do tyłu i wjechać przednimi kołami na krawężnik. Ustawić tylne koła przy krawężniku a następnie wjechać na krawężnik.
Jazda wózkiem:
- Używać podjazdów i wind kiedy są dostępne
- Jeśli to tylko możliwe unikać wjeżdżania po schodach, jeśli nie ma innej możliwości zapewnić sobie pomoc przynajmniej jednej osoby
- Nie próbować wnosić lub znosić wózka po schodach, chyba że Pan/Pani i Pana/Pani pomocnik są pewni, że Pan/Pani mają Państwo kontrolę nad wózkiem i są w stanie udźwignąć ciężar wózka i osoby w nim przebywającej
- Podczas całej operacji opiekun i pomocnik muszą zachować równowagę i mocno trzymać wózek
- Ręce osoby obsługującej muszą być umieszczone na rękojeści uchwytu do pchania przez cały czas
- Odpoczywać w regularnych odstępach czasu
- Nie podnosić wózka za podnóżek

Schodzenie ze schodów - ustawić wózek przednimi kołami przy górnej krawędzi schodów; przechylić uchwyt do tyłu i popchnąć wózek do przodu, aż tylne koła znajdą się na końcu górnego stopnia; osoba pomagająca stoi z przodu, trzymając wózek za przednią ramę; podnieść wózek i opuścić tylne koła w dół stopnia, proszę kontynuować stopień po stopniu aż do dołu (rysunek nr 1).
Wchodzenie po schodach - ustawić wózek tylnymi kołami przy dolnym stopniu schodów; Przechylić wózek do tyłu i podnieść do następnego stopnia; pomocnik stoi z przodu, podtrzymuje i podnosi wózek chwytając za przednią ramę; proszę kontynuować stopień po stopniu do góry (rysunek nr 2).
Składanie wózka - odpiąć zamek błyskawiczny tapicerki podłokietnika, odblokować tylne usztywnienie, naciskając na jego środek. Odblokować usztywnienie siedziska. Chwycić jeden uchwyt, a drugą ręką podciągnąć rurę siedziska. Upewnić się, że oparcie jest pochylone w kierunku wózka, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu składania. Zablokować zaczep do przechowywania. Nie ma potrzeby demontażu podnóżka w celu złożenia wózka (Rysunek nr 3).
Tapicerka - siedzisko, usztywnienie siedziska, oparcie i przedłużenie oparcia nie są zdejmowane. Można je wyczyścić ciepłą wodą i łagodnym detergentem.
Podłokietniki - odpiąć rzep i napę zatrzaskową, aby zdjąć tapicerkę podłokietników.
Prać ręcznie w maks. temperaturze 40°C z użyciem łagodnego detergentu.
Usztywnienie siedziska - ze względów bezpieczeństwa nie zdejmować usztywnienia siedziska. Usztywnienie jest wyposażone w paski z klamrą i rzepem, które można napiąć lub poluzować w zależności od potrzeb, a tym samym dostosować sztywność siedzenia. Paski są mocowane od spodu usztywnienia siedziska. Wyregulować usztywnienie, gdy wózek jest częściowo złożony (rysunek nr 4). W razie potrzeby należy napiąć lub poluzować paski, a następnie całkowicie rozłożyć cały wózek (rysunek nr 5). Istnieją dwa paski dla rozmiarów 38 i 42.

KONSERWACJA, UTYLIZACJA WYROBU:

- Państwa wózek został zaprojektowany zgodnie z wysokimi standardami i przy prawidłowym użytkowaniu oraz konserwacji zapewni wiele lat bezawaryjnego użytkowania.
- Regularnie sprawdzać elementy blokujące, zaczepy, podnóżek, mocowania przegubów, aby upewnić się, że są one bezpieczne i w pełni sprawne
- Hamulce, koła, opony podlegają zużyciu i powinny być wymienione w razie potrzeby przez warsztat zatwierdzony przez dostawcę wózka
- Zalecamy, aby wózek był sprawdzany przez autoryzowany serwis co 12 miesięcy.
- Zalecamy, aby po 24 miesiącach odwiedzić dział serwisowy.
- Jeśli wózek jest uszkodzony lub wymaga naprawy, autoryzowany warsztat będzie w stanie doradzić, co jest wymagane.
- Alternatywnie, dział obsługi klienta PATRON Bohemia a.s. jest do Państwa dyspozycji w celu uzyskania informacji o wózku.
- W tym wózku należy stosować wyłącznie części zamienne PATRON Bohemia a.s.
- Jeśli części Państwa wózka staną się sztywne lub trudne w obsłudze (lub nie później niż co 6 miesięcy), należy upewnić się, że przyczyną nie jest brud, nałożyć lekką warstwę smaru w sprayu, np. WD 40 (nie używać oleju ani tłuszczu). Proszę upewnić się, że środek smarny wniknął pomiędzy komponenty, ale nie rozpylać go zbyt dużo, ponieważ może to sprzyjać gromadzeniu się brudu. Proszę wytrzeć wszelkie pozostałości smaru. Regularne smarowanie ruchomych części wydłuży żywotność wózka i ułatwi jego rozkładanie i składanie.
- Należy upewnić się, że są Państwo zaznajomieni z obsługą wózka. Wózek powinien zawsze łatwo się rozkładać i składać. Jeśli tak nie jest, proszę nie forsować mechanizmu - proszę przestać i przeczytać instrukcję.
- Koła, części plastikowe i metalowe można czyścić gąbką z ciepłą wodą i łagodnym detergentem.
- Tkaninę fotelika można prać ręcznie (maks. 30°C).
- Nigdy nie czyścić środkami ściernymi, na bazie amoniaku, wybielaczami i środkami czyszczącymi na bazie alkoholu.
- Po wystawieniu na działanie wilgoci, proszę wytrzeć wózek miękką szmatką i pozostawić w pełni rozłożony w ciepłym i suchym miejscu.
- Przechowywać wózek w suchym, bezpiecznym miejscu.
- Należy regularnie sprawdzać i dokręcać złącza śrubowe.
- Jeśli używane są kable sterowania (hamulce, teleskopy, pochylenie), należy je regularnie sprawdzać i w razie potrzeby ustawić i naoliwić.

Żywotność produktu: Przewidywany okres użytkowania produktu wynosi 5 lat. Przewidywany okres użytkowania produktu został wykorzystany jako podstawa do opracowania produktu i określenia wymagań dotyczących użytkowania produktu w danym celu. Dane te obejmują również wymagania dotyczące konserwacji w celu zapewnienia wymaganej skuteczności i bezpieczeństwa wyrobu.
Informacje dotyczące utylizacji: W celu utylizacji, wyrób należy zutylizować zgodnie z lokalnymi obowiązującymi przepisami ochrony środowiska w kraju, w którym wyrób był używany.

WARUNKI GWARANCJI:

1. Wyrób jest objęty 24 miesięczną gwarancją liczoną od dnia zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i technologiczne.
2. Wyrób może być używany tylko i wyłącznie do celu w jakim został zaprojektowany, instrukcja użytkowania musi być przestrzegana.
3. Wyrób musi być właściwie używany, konserwowany i przechowywany zgodnie z instrukcją użytkowania.
4. Nie ściągać etykiety identyfikacyjnej. Musi ona być czytelna i nieuszkodzona przez cały okres gwarancji.
5. Zgłoszenia gwarancyjnego należy dokonać u sprzedawcy, u którego wyrób został zakupiony. Prawidłowo wypełniona "Karta gwarancyjna" oraz dowód zakupu muszą zostać dołączone do zgłoszenia gwarancyjnego. Każdą wadę należy zgłosić natychmiastowo.
6. Procedura reklamacyjna może być rozpoczęta kiedy wózek zostanie dostarczony w całości i w oryginalnym opakowaniu, zapakowany starannie i zabezpieczony od uszkodzeń. Właściciel jest zobowiązany do dostarczenia wózka wyczyszczonego, wymytego i w zgodzie z podstawowymi zasadami higieny. Podstawowa konserwacja i czyszczenie nie może być wymagane w zgłoszeniu gwarancyjnym.
7. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń spowodowanych przeciążeniem wózka, użyciem siły, nieuprawnionymi zmianami konstrukcyjnymi wózka lub wyposażenia dodatkowego oraz naturalnego zużywania się części w szczególności zabrudzeń i uszkodzeń tapicerki, zużycia części plastikowych, hamulców, bieżnika opon oraz przebić opon.
8. W przypadku zaistnienia poniższych sytuacji następuje utrata gwarancji: użytkownik nie stosuje się do zasad użytkowania, konserwacji i przechowywania wymienionych w instrukcji użytkowania lub kiedy produkt jest serwisowany przez jednostki inne niż autoryzowane centra serwisowe lub kiedy naklejka identyfikacyjna nie jest umieszczona na wózku i jednocześnie na karcie gwarancyjnej.
9. Okres gwarancji nie jest równy okresowi użytkowania to oznacza, że wózek prawidłowo użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i właściwie konserwowany może służyć znacznie dłużej niż wynosi okres gwarancji.
10. Ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i obrażenia spowodowane użytkowaniem wyrobu niezgodnie z zasadami zawartymi w " Instrukcji użytkowania".

Producent, PATRON Bohemia a.s., zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach.

NOTATKI:

UCZESTNIK ŁAŃCUCHA DYSTRYBUCJI / SCHEMAT IDENTYFIKACYJNY

PATRON Bohemia a.s.
Českolipská 3419, Mělník, CZ
(www.patron.eu)

Producent -
kontrola końcowa produktu / nazwa:

Podpis:

Etykieta identyfikacyjna produktu:

Importer / dystrybutor w UE :
(nazwa, adres, dane kontaktowe)

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
MOBILEX Sp. z o.o.
ul. Duńska 3/5, Łódź
tel.: 42 214 29 11; fax.: 42 214 14 05
www.mobilex.pl ; info@mobilex.pl

Importer / dystrybutor w UE (pieczątka):

Punkt sprzedaży / Partner serwisowy:
(nazwa, adres, dane kontaktowe)

Punkt sprzedaży / Partner serwisowy (pieczątka):

Data zakupu (dzień, miesiąc, rok):

___.____._____

Nazwa (drukowanymi literami), numer telefonu, pieczątka i podpis sprzedawcy: